




Návod k obsluze MINI RÁMEČEK

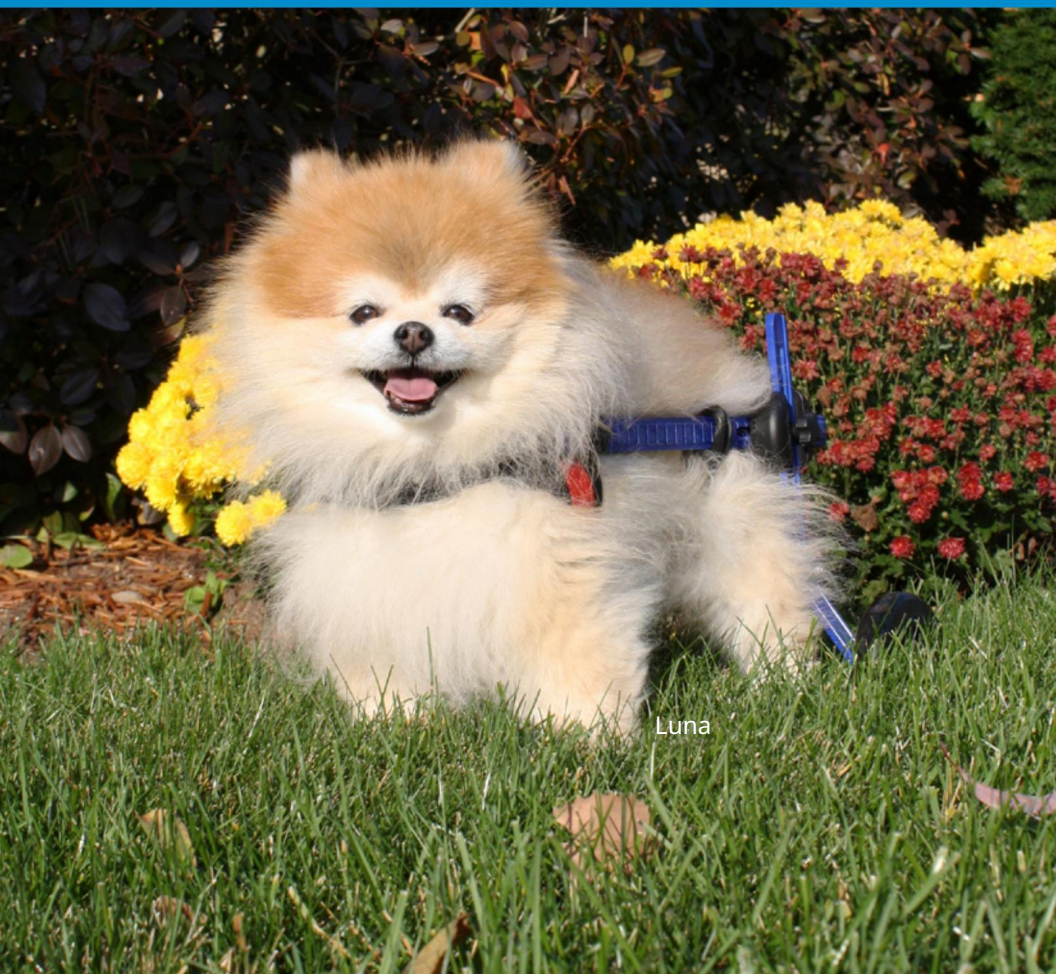


Luna

Děkujeme, že jste si zakoupili invalidní vozík Walkin' Wheels® MINI.
Otázky nebo připomínky?

Zavolejte nám na: (603) 577-8854 nebo nám napište e-mail na adresu: HelpMe@WalkinPets.com

Obsah Walkin'


Wheels MINI: 3 velikosti	3	Díly Walkin' Wheels® MINI.....	3
Naučte svého mazlíčka používat Walkin' Wheels®	4	Rychlý průvodce	5
Přípevnění nožních kroužků a svorek	7	Třmeny.....	8
Velikosti kol	8	Jste připraveni začít?	8
Uchycení mini předního kola Walkin' Wheels	9	Nastavení pro zadní mini vycházková kola	10
Montáž předních kol na rám.....	10	Je vozítko správně seřizeno?	12
Co je součástí balíčku BF1?	13	Otázky nebo hodnocení kování?.....	13
Údržba, odpovědnost a záruka	13	Zásady vrácení/výměny.....	14
Volitelné položky a příslušenství	14		

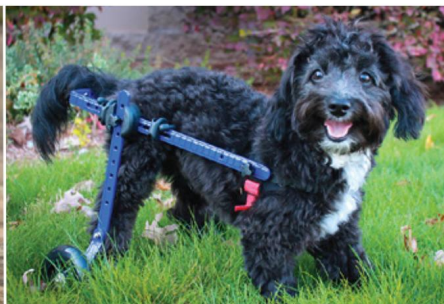


Walkin' Wheels® MINI: 3 velikosti

V závislosti na rozměrech vašeho mazlíčka vám byl zaslán jeden z následujících invalidních vozíků.

MINI B1:

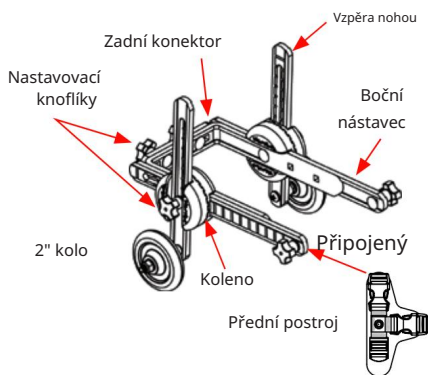

MINI B2 nebo MINI B3:

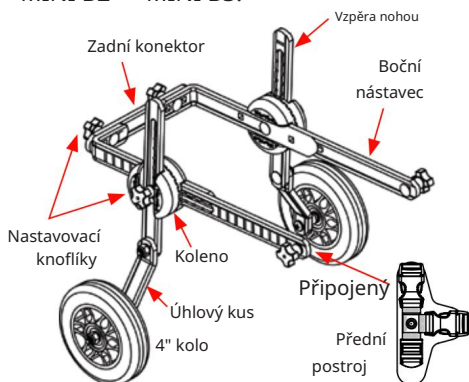

Části Walkin' Wheels® MINI



Extra sada upevňovacích prvků



Svěrky na nožní kroužky



MINI B1

Rám invalidního vozíku s
Šířkový konektor,
Nainstalované nástavce,
vzpěry a 2" kola



MINI B2

Rám invalidního vozíku s
Šířkový konektor,
Prolužovače, vzpěry a
Nainstalovaná 4" kola



MINI B3

Rám invalidního vozíku s
Šířkový konektor,
Prolužovače, vzpěry a
Nainstalovaná 4" kola



Přední popruh s pohodlnými
rukávy (připevněný k rámu.)



Nožní kroužky
pro podporu (sedadla).



Třmeny, aby se tlapy neťahaly;
použijte v případě potřeby.

Naučte svého mazlíčka používat Walkin' Wheels®

Walkin' Wheels® jsme vytvořili se záměrem, že si nastavíte invalidní vozík, posadíte do něj svého mazlíčka a za pár okamžiků ho budete znovu sledovat, jak běhá a hraje si. Může se to tak stát, ale ne vždy.

Invalidní vozík může být úpravou pro zvíře. Pro některé je podivné zařízení, které ho/ji sleduje, vydává podivné zvuky a zachycuje se na nábytku a dveřích. Přizpůsobí se těmto změnám, ale potřebují trochu času.

Při prvním nasedání na invalidní vozík doporučujeme být klidný, tichý a pomalý. Dopřejte svému mazlíčkovi hodně hlazení a ujištění. I pamlsky pomáhají!

1. Na začátku tohoto procesu doporučujeme, abyste používali opravdu dobré pamlsky, kterými odměníte svého mazlíčka za pozitivní posílení/chování. Psí sušenky mu/jí většinou nestačí, aby se nadchl. Nebudete muset používat speciální pamlsky každý den, jen na začátku tréninkového procesu.

Hladový mazlíček je motivovaný mazlíček! Pracujte se svým mazlíčkem předtím, než ho nakrmíte. Pokud bude mít hlad, bude více toužit věnovat pozornost a získat odměnu za jídlo.

2. Nedávejte svého mazlíčka okamžitě na invalidní vozík. Shromáždit invalidní vozík a ponechte jej na místě, kde jej váš mazlíček může vidět, cítit a dotýkat se ho.
3. Použijte Rychlý průvodce na další stránce.
4. Poté, co je váš mazlíček na invalidním vozíku, podržte odměnu za jídlo přímo v úrovni jeho nosu a nakrmte několik kusů. Poté můžete posunout jednu nohu dozadu a opět držet před sebou odměnu za jídlo.
Poté by měla jít směrem k vám, aby si vzala pamlsky. Než se nadějete, ona/on chodí ve Walkin' Wheels! Opět mu dejte pamlsky a pozitivní pochvalu spolu s tím, když ho uvidíte čurat nebo kakat venku na invalidním vozíku.
5. Pro začátek pracujte ve velmi krátkých (5-10) minutových sezeních, několikrát denně. Dopřejte svému mazlíčkovi přestávky mezi jednotlivými sezeními.

Poznámka: Nenechávejte prosím svého mazlíčka na invalidním vozíku bez dozoru. Nenechávejte v něm svého mazlíčka celý den. Doporučuje se jedna hodina.


Průvodce rychlým startem

Krabice Walkin' Wheels MINI obsahuje vše, co potřebujete, aby se váš mazlíček mohl válet.

1. Vyjměte invalidní vozík z krabice. Červený pásek předního postroje bude dole a modrý pás nahoře. Uvolněte dvě spony na modrém a černém popruhu tak, aby visely dolů a držely jej připevněný k invalidnímu vozíku.
 2. Uvolnění kol na kloubu. Otočte knoflíkem na kloubu o 2 otáčky proti směru hodinových ručiček, abyste jej uvolnili. Posuňte vzpěru kolmo k rámu invalidního vozíku s **červeným** popruhem na spodní straně. Upravte výšku podle rozměru vašeho záhybu boku (viz str. 6).
 3. Délka: Zatímco je knoflík stále uvolněný, upravte délku podle podpaží vašeho psa až po měření zádi (viz str. 6).
 4. Nastavení kloubu: Utáhněte kulatý černý kloub tak, aby zuby pevně zapadly.
 5. Kroužky na nohy: Připevněte všechny čtyři dráty kolem rámu, abyste vytvořili sedadlo. Dráty by měly být na každé straně kloubu pevně omotané. Pokud zatlačíte kus uprostřed, měl by viset dolů 1-2" a vytvořit kolébku (viz str.7).
 6. Šířka: Odšroubujte knoflíky na zadní straně a upravte je podle nejširší oblasti vašeho psa, což je obvykle šířka hrudníku (viz str.7).
 7. Třmeny: Připevněte třmeny kolem dvou černých knoflíků v zadní části. Zajistěte horní část kolem knoflíků a upravte délku třmenů (viz str. 8).
 8. Nainstalujte svorky na každou stranu kloubu a poté sedlo nožního kroužku str. 8 9.
- Připraveno k jízdě: Viz str. 8, jak dostat svého mazlíčka na invalidní vozík.

Podívejte se

na toto: www.WalkinPets.com/mini-dog-wheelchair-instructional-videos

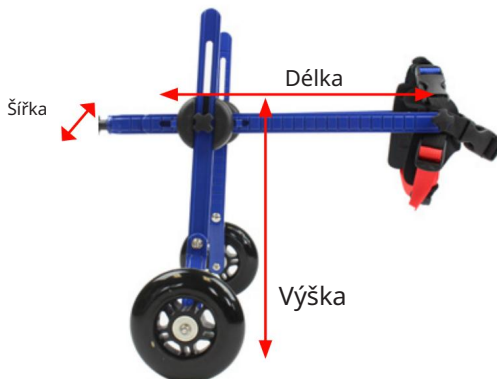

Šířka

Chcete-li nastavit šířku rámu invalidního vozíku na správnou velikost, změřte hrud' vašeho mazlíčka a poté k tomuto rozměru přidejte 1/2 palce; šířka rámu invalidního vozíku by měla být nastavena na tuto velikost.

Pokud je potřeba upravit šířku, odšroubujte zadní knoflíky proti směru hodinových ručiček, dokud se zadní konektor neuvolní, dávejte pozor, abyste neztratili malé podložky, které jsou uvnitř knoflíků.


Zarovnejte zadní konektor s libovolnými otvory, abyste získali požadovanou šířku. Ujistěte se, že je zadní konektor nainstalován na vnější straně (za) rámem invalidního vozíku.

Našroubujte knoflíky na vnější stranu zadního konektoru a ujistěte se, že jste vložili každou podložku mezi knoflík a zadní konektor. Utáhněte knoflíky.




Délka

Knoflíky, které jsou umístěny na kloubu, drží vzpěry a boční nástavce na místě. Změřte svého mazlíčka od podpaží po zadek. Zajistěte, aby se měření shodovalo s měřením od palce za kloubem k přednímu konci každého bočního nástavce, jak je znázorněno níže.

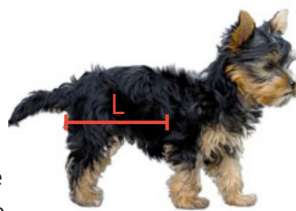

Změřte svého mazlíčka od podpaží po zadek

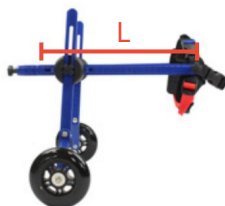

Přizpůsobte se rozměrům vašeho mazlíčka

Poznámka: Kloub by měl být ve středu kyčle vašeho mazlíčka. Přední část extenderu by měla být u lopatky. Měli byste mít několik centimetrů v zadní části zadku pro odstranění (čůrání a kakání).

Výška

Změřte nohy vašeho mazlíčka (výška zadní nohy); to by mělo odpovídat rozměrům od 2 palců pod rámem k zemi. Upravte vzpěru tak, aby odpovídala rozměrům vašeho mazlíčka.

Toto nastavení můžete provést odšroubováním knoflíku na každém kloubu o několik otáček a poté posunutím modré vzpěry nahoru pro snížení výšky nebo dolů pro zvýšení výšky. Poté utáhněte každý knoflík.

Poznámka: Pro snadný pohyb vzpěr položte dlaň na vnitřní stranu, přes kloub.

Provedte měření zadní nohy vašeho mazlíčka




Přizpůsobte se rozměrům vašeho mazlíčka.



Přípevnění nožních kroužků a svorek

Poté, co nastavíte invalidní vozík pro vašeho mazlíčka, můžete nyní nainstalovat svorky na nohy. Ty zabrání posunutí nožních kroužků dopředu. K rámu připevníte 4 objímky na nožní kroužky, 2 na každou stranu kloubu.

1. Určete, zda potřebujete dvojitou širokou nebo jednoduchou svorku. Jeden pruh vyžaduje jednoduchý, dva vyžadují dvojitý. (Viz fotografie níže.)
2. Umístěte svorku na rám s otvorem na vnější straně rámu.

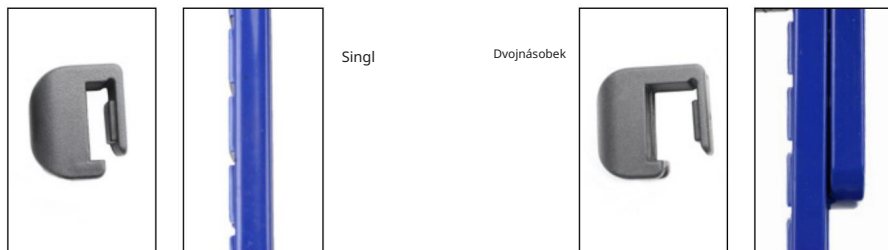

3. Kývejte sponou dopředu a dozadu pohybem dolů. Ujistěte se, že okraj na vnější straně klipu je pod rámem.
4. Posunutím doleva nebo doprava zajistěte na místě. Svorky (4) by měly být blízko koleno.
5. Protáhněte drát nožních kroužků horní částí otvoru a poté zabalte drát bezpečně kolem rámu. Kroužky na nohy jsou zadní opěrný systém pro vašeho mazlíčka. Potažené dráty musí být umístěny na každé straně každého kloubu a ujistěte se, že pěnové kroužky nohou vypadají jako dvě písmena C zády k sobě.

Noha umístěná uvnitř každého kroužku



Poznámka: Nožní kroužky by měly viset 2-3" pod rámem invalidního vozíku a ujistěte se, že je část uprostřed připojena k pěnovým trubkám.

Třmeny

Pokud jsou nohy vašeho mazlíčka ochrnuté, použijte třmeny k tomu, abyste jeho/její nohy drželi nad zemí. Horní konec každého třmenu je zajištěn kolem každého zadního knoflíku. Horní kulový zámek se používá k držení každého třmenu na místě a spodní kulový zámek je zajištěn nad hlezmem.



Velikosti kol

Váš invalidní vozík se dodává buď s 2" nebo 4" koly připevněnými ke vzpěrám.

Kola jsou terénní a nepropíchnou se. Pokud se nakonec opotřebují, můžete si koupit náhradní:

www.WalkinPets.com/spare-parts

Jste připraveni začít?

1. Kroužky na nohy: Zvedněte svého mazlíčka a vložte ho do kroužků na nohy. Každá noha jde dovnitř kruhu. Břicho bude spočívat na střední části suchého zipu, která drží kroužky pohromadě. Zadní opěrky prstů by se měly dotýkat země.

Pokud jsou nohy zvířete ochrnuté, použijte třmeny.

2. Přední postroj: Odklikněte modrý a černý popruh, a nechte postroj připojený k předním knoflíkům.

Přední nohy zvířete nastavte před červený popruh na předním postroji. Vezměte modrý pásek přes záda a připněte jej na místo. Umístěte černý pásek před hrudník a připněte jej na místo. Nastavte všechny tři popruhy tak, aby přiléhaly. Přebytné pásky zastrčte do černých pohodlných rukávů.

3. U intaktních psů chceme, aby byl středový konektor těsně před varlaty a za penisem. To mu poskytne plnou podporu a zároveň mu zajistí pohodlí a umožní mu jít na záchod.



Podívejte se na video od 6:20 minuty/sekundy, jak posadit vašeho mazlíčka na invalidní vozík:

<https://youtu.be/6bppcizle3s>

Poznámka: Pokud potřebujete postroj v určitém okamžiku umýt, můžete jej sejmut odšroubováním knoflíků na každé straně a poté odstraněním šroubů a podložek.

Upevnění na mini přední kola Walkin' Wheels

Zakoupeno samostatně

Nástavec na přední kola Walkin' Wheels poskytuje pohyblivost psům se slabostí předních nohou nebo slabostí všech čtyř nohou. Je ideální pro pomoc postiženým mazlíčkům při cvičení a pro rehabilitaci, když se hojí. Stejně jako ostatní produkty Walkin' Wheels je nástavec na přední kolo nastavitelný, takže se hodí na invalidní vozík Walkin' Wheels pro psa jakékoli velikosti od 2 do 10 liber a lze jej kdykoli snadno odstranit.




Poznámka: Měření výšky zadní nohy vašeho psa určilo velikost nástavce předního kola, kterou jste obdrželi.

Co je v přední připojovací krabici B2 nebo B3:



Nastavení pro zadní mini vycházková kola (musí být provedeno jako první):

1. Odstraňte zadní svorky, nožní kroužky a přední svazek.
2. Odstraňte nastavovací knoflík a malou podložku z kloubu.
3. Vytáhněte sestavu vzpěry/kola.
4. Odstraňte obě strany černého kulatého kloubu.
5. Demontujte dva boční nástavce a **pouze B2** – nahradte je extra sadou v sadě předního kola. Otočte je tak, aby byl čtvercový otvor nyní připevněn k zadnímu kloubu na každé straně. (Ujistěte se, že indikátory čar na bočních nástavcích stále směřují ven na každé straně.) (Viz obrázek níže) Podívejte se na instruktážní video www.handicappedpets.com/instructional-videos-mini-dog-wheelchair-front-attachment/

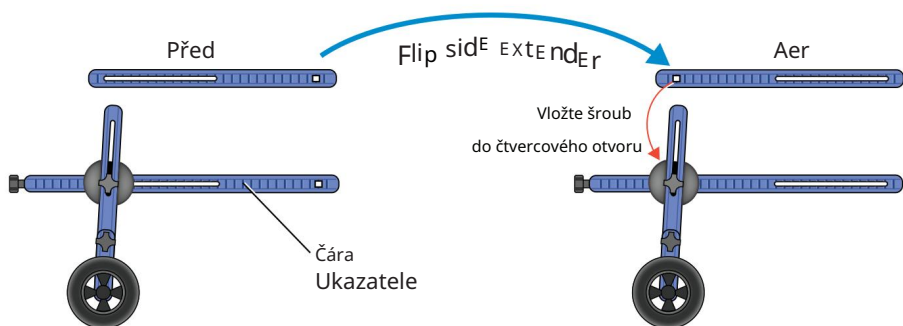

6. Vložte šroub středním čtvercovým otvorem na rámu a skrz boční nástavec čtvercový otvor.
7. Znovu nainstalujte kloub tak, že jeho polovinu umístíte na šroub. Ujistěte se, že šipka ukazuje na přední část invalidního vozíku, zuby na vnější straně.
8. Připevněte vnější polovinu kloubu a ujistěte se, že šipka směřuje nahoru, zuby uvnitř.
9. Vložte vzpěru do kloubu ve správné výšce pro vašeho psa.
10. Nyní vyměňte podložku a seřízení a utáhněte


Instalace předních kol na rám Poznámka: Nebudete

používat přední popruhy dodané se zadním invalidním vozíkem.

Na horní části koleček uvidíte písmeno „R“ nebo „L“, „R“ je pro pravou nohu psa a „L“ je pro levou nohu psa.

Hroty kloubů:

Vnitřní šipka ukazuje dopředu. Vnější šipka ukazuje nahoru na anděla

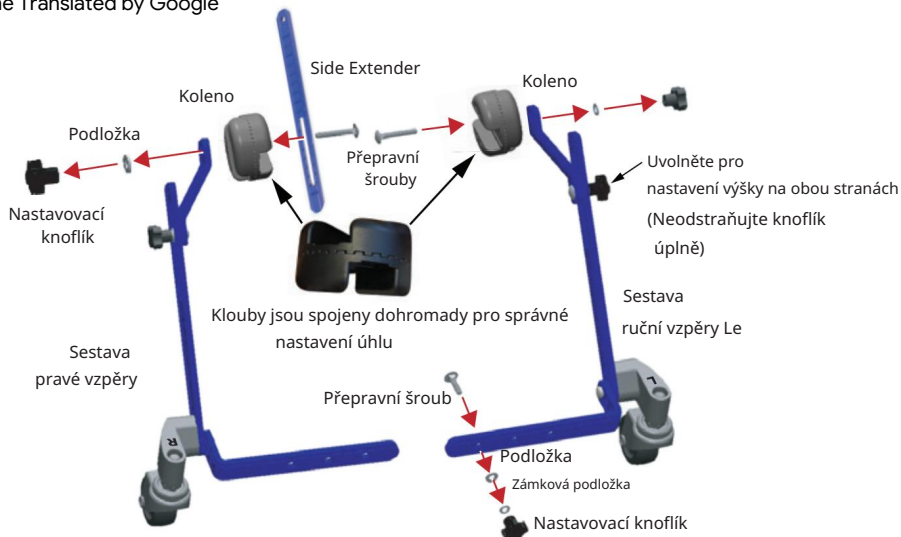

Kroky k montáži předních kol na rám 1. Odstraňte

nastavovací knoflík na kloubu, držte spojený kloub v jednom kuse, vyjměte šroub a podložku. Držení kloubu v jednom kuse by mělo zajistit správný úhel pro montáž kolečka a kolečka. (uchycení kolečka by mělo být vždy rovnoběžné se zemí).

2. Vložte šroub procházející střední štěrbinou bočního nástavce a poté jej zasuňte přes lepený kloub, otvor pro úhelník, podložku, seřizovací knoflík bezpečně utážený.

3. Udělejte totéž pro druhou přední stranu kolo. Pokud máte B1, pokračujte krokem 5.

4. Připojte pravou i levou stranu boky přední stabilizační tyče. Ujistěte se, že jsou obě strany zarovnané, vložte šroub do čtvercového otvoru (šroub by měl sedět v jedné rovině s tyčí), nasadte plochou podložku, poté zajistěte podložku, nasadte nastavovací knoflík a pevně přišroubujte (střed stabilizační tyče by se neměl hýbat). Určitý pohyb stabilizační tyče u upevňovacích šroubů kolečka je normální.



5. Připojte jednotlivé svorky na každé straně kloubu (jako zadní) (od kloub na konec na boční tyči, měl by tam být 2")

6. Připevněte přední a zadní nožní kroužky tak, že protáhnete drát nožního kroužku dolů každým z kanálů svorky nožního kroužku a poté drát omotáte nahoru a kolem rámu. Přední nožní kroužky by měly viset o něco níže než zadní nožní kroužky, aby se přizpůsobily hrudníku. (Viz obrázek na straně 12)

Je Wheelcahir správně nastaven?



ŠÍŘKA: Nastavte šířku v zádech od nejširší části těla vašeho mazlíčka (obvykle hrudníku). Na výběr je několik čtvercových otvorů. • Ujistěte se, že jsou knoflíky dotaženy a zajištěné.

VÝŠKA: Nastavte výšku tak, aby byl rám bočního nástavce umístěn uprostřed těla vašeho mazlíčka.

- Tlapky by se měly dotýkat země
- K upevnění vzpěry k rámu je třeba utáhnout knoflíky.
- Nožní kroužky by měly viset dolů asi 3" pod modrým rámem jako sedadlo, přičemž spojovací kus drží dvě měkké trubky pohromadě. Přední nožní kroužek bude o něco níže než zadní.

DÉLKA: Upravte délku uvolněním knoflíku na předním kloubu a posunutím kloubu do správné polohy. Každý drát nožního kroužku bude na každé straně blízko černého kloubu.

- Přední nohy vašeho mazlíčka budou zarovnané s černými klouby vpředu a zadní.

TŘMENY: Pokud jsou zadní nohy vašeho psa ochrnuté, budete muset pomocí třmenů držet chodidla nahoře, aby netáhly po zemi.

- Zajistěte konec uzlem přes nastavitelný knoflík a utáhněte tlačítkem, aby pevně držel. (viz diagram výše)

Pokud si stále nejste jisti, zda sedí, pošlete nám prosím e-mailem fotografie zezadu a ze strany na fotografii vašeho mazlíčka na invalidním vozíku na: helpme@WalkinPets.com.
Nezapomeňte do předmětu uvést číslo objednávky!


Co je v balíčku BF1

(Postupujte podle stejných pokynů pro sestavení BF2)

Balení BF1 obsahuje:



Instalace předních kol BF1 na rám:

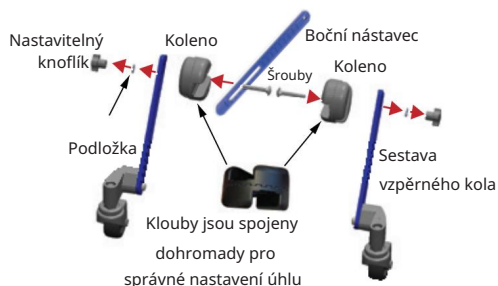

Otázky nebo hodnocení kování?

Zavolejte: (888) 253-0777 nebo napište e-mail: HelpMe@WalkinPets.com

Pokud potřebujete zhodnocení kování, jsme tu, abychom vám pomohli. Pošlete nám e-mail s bočními a zadními fotografiemi vašeho mazlíčka na invalidním vozíku. Ujistěte se, že jste do předmětu uvedli číslo prodejního dokladu, abychom mohli identifikovat, kdo jej odeslal. Nebo nám můžete zavolat v pracovní době.

Údržba, odpovědnost a záruka

Údržba: Při

správném používání a údržbě je invalidní vozík navržen tak, aby vydržel po celý život. Pokud potřebujete náhradní díly pro kola, postroje a další opotřebované položky, můžete je zakoupit na [www.WalkinPets.com/náhradní díly](http://www.WalkinPets.com/náhradní_díly). Rám vozíku nerezaví. Všechny součásti lze vyjmout a vyčistit. Olejování není nutné.

Omezená

odpovědnost: Walkin' Wheels® je poskytován jako pomůcka pro chůzi pro zvířata, která jsou v péči veterináře a pro která byl doporučen invalidní vozík.

Společnost Wheels for Pets, LLC a její přidružené společnosti, zástupci a distributoři nijak nereprezentují účinnost nebo vhodnost tohoto produktu.

Záruka: Na

rám invalidního vozíku Walkin' Wheels® poskytuje výrobce, společnost Wheels for Pets, LLC, záruku po dobu pěti let od data nákupu na vady materiálu nebo zpracování. Pokud se rám při běžném používání rozbije, dejte nám prosím vědět a my invalidní vozík opravíme nebo vyměníme dle vlastního uvážení. Jste odpovědní za všechny poplatky za dopravu. Záruka je nepřenosná.

Zásady vrácení/výměny

Přijímáme vrácení a výměnu všech našich produktů, pokud budou vráceny do 30 dnů od obdržení jako nové se všemi součástmi a kusy. Co znamená "jako nové"? To znamená, že produkt vrátíte přesně tak, jak jste jej obdrželi. Než nám je pošlete zpět, použijte váleček na vlákna a odstraňte vlasy. Vyzkoušejte produkt v interiéru, abyste zabránili znečištění. Výrobek pečlivě zabalte. Chraňte všechny díly před třením o sebe nebo před možným poškozením při přepravě.

Co se stane, když je produkt vrácen špinavý, chybějící díly nebo poškozený? Naše oddělení vrácení bude muset v případě potřeby vyčistit/vyleštit/opravit/vyměnit. To vyžaduje zdroje, takže vám může být účtován poplatek za opětovné naskladnění. Pokud bude vrácení odmítnuto z důvodu jeho stavu, budeme vás kontaktovat pro projednání a poskytnutí fotografií. Pokud si nejste jisti, jak produkt používat, přebalovat nebo jak se zásady vztahují na produkt, kontaktujte nás a my vám pomůžeme! www.WalkinPets.com/returns Náhradní díly pro invalidní vozíky najdete na: www.WalkinPets.com/spareparts

Volitelné položky a příslušenství

Příslušenství pro invalidní vozíky



Walkin'® Mini vesta pro invalidní vozík

www.WalkinPets.com/mini-wheelchair-vest

Tato vesta je pohodlný postroj ideální pro miniaturní jezevčičky a malé psy se širokým hrudníkem. Tato vesta kompatibilní s invalidním vozíkem je vyrobena z odolného neoprenového materiálu a může zlepšit usazení miniinvalidního vozíku Walkin' Wheels pro domácí mazlíčky.



Kryt na amputaci

www.WalkinPets.com/amputee-leg-ring-cover Kryt na

amputaci je určen pro domácí mazlíčky s hladkou amputací a je navržen tak, aby navlékal přes kroužky na nohou a uzavřel jednu stranu pro pohodlí vašeho mazlíčka.



Walkin'® Belly Support

www.WalkinPets.com/walkin-belly-support Walkin'

Belly Support pomáhá poskytnout dodatečnou podporu pro záda vašeho mazlíčka při používání invalidního vozíku Walkin' Wheels. Bříšší opora, vyrobená z lehké, ale pevné neoprenové tkaniny, pomáhá zvednout střed těla domácího mazlíčka a zmírnit tak napětí na páteři.



Walkin'® Ski Attachment

www.WalkinPets.com/walkin-ski-attachment

Walkin' Ski Attachment klouže sněhem a udržuje vašeho mazlíčka aktivního po celou zimu. Snadno vyměníte standardní kolečka/vzpěry vašeho psa za lyže a pomozte vašemu psovi bavit se hraním nebo chůzí ve sněhu.

Řešení vnitřní mobility



Walkin'® Scooter

www.WalkinPets.com/walkin-scooter

Walkin' Scooter pro domácí mazlíčky je navržen tak, aby váš mazlíček byl v pohodlí a aktivní po celý den! Koloběžka umožňuje domácím mazlíčkům snadný pohyb po domě a snadno klouže po tvrdém dřevě, dlaždicích, linoleu a kobercích.



Walkin'® Drag Bag

www.WalkinPets.com/walkin-drag-bag Walkin'

Drag Bag je navržen pro domácí mazlíčky k použití v domácnosti, když nejsou na židli. Skvělé pro ochranu hrudníku a končetin, aby se zabránilo oděrkám způsobeným tažením po drsném povrchu.

Ochrana tlapky



Walkin'® Pet Boots

www.WalkinPets.com/walkin-pet-boots-for-dogs-and-kočky

Vysoce kvalitní, pevné boty brání psům, aby se dostali do domu špíny, bláta nebo sněhu. Pomáhá domácím mazlíčkům, kteří tahají tlapky, a poskytuje jistotu na kluzkých površích, jako jsou podlahy z tvrdého dřeva.

Ideální pro domácí mazlíčky s řeznými ranami, modřinami nebo citlivými tlapkami.

Přední a zadní tréninkové ponožky bez klepání

www.WalkinPets.com/no-knuckling-training-sock



Dočasný tréninkový nástroj, který pomáhá správně umístit tlapku. Je určen pro krátkodobé, vícenásobné použití, aby pomohl korigovat chůzi a trénoval domácí mazlíčky, aby zvedli tlapku při chůzi.



Dráteník

BUĎTE V POHYBU



Ritchie

BUĎ ŠTASTNÝ



Dudák

BUĎTE ŽASNUTÍ



Kolík

BUĎTE SPOLU

ZÁZRAKY V POHYBU



Walkin' Pets
by handicappedpets.com

105 Rt 101A, Suite 18 • Amherst, NH 03031 • (888) 253-0777
www.WalkinPets.com

Patenty: US 7549398 • Japonsko 5385584 • Kanada 2641092 • EPO 2 050 418 Ochranné známky:
Walkin' Wheels® 4,765,026 • 4,882,354 • 3,725,405 • 4,765,026 dalších patentů a nevyřizovaných
ochranných známek.

Walkin' Wheels® je registrovaná ochranná známka společnosti Wheels for Pets, LLC