



MALÝ RÁM s volitelným
uchycením předního kola s plnou podporou



Mayzie

Děkujeme, že jste si zakoupili Walkin' Wheels®
Malý invalidní vozík. Otázky nebo připomínky?
Zavolejte nám na: (603) 577-8854 nebo nám napište
na adresu: HelpMe@WalkinPets.com

Obsah

Rychlý návod	3
Části zadního malého invalidního vozíku Walkin' Wheels®.....	4
Naučte svého mazlíčka používat Walkin' Wheels®	5
Nastavení zadního invalidního vozíku	7
Pomocí západkových tlačítek upravte délku, šířku a výšku	7
Úprava délky	7
Je délka správná?	7
Nastavení šířky	8
Upevnění vzpěr a kol	8 Nastavení
výšky	8
Třmeny.....	9
Připevněte nožní kroužky k invalidnímu vozíku.....	10
Upevnění předního postroje	11
Je invalidní vozík správně nastaven?	12
Volitelné stavěcí šrouby pro redukci hluku.....	14
Břišní pás, je-li potřeba	15
Upevnění předního kola Walkin' Wheels®	16
V balíčku	16
Sestavení plně podpěrného invalidního vozíku	17
Umístění vašeho psa na plně podpůrný (čtyřkolkový) invalidní vozík.....	18
Volitelné položky a příslušenství	19
Nadace pro handicapovaná zvířata	22
Členský program AARF AARF	22 Opořebení, údržba,
odpovědnost a záruka	23

Rychlý návod

1. Nastavte délku invalidního vozíku (str. 7), výšku (str. 8) a šířku (str. 8)
2. Připojte nožní kroužky k invalidnímu vozíku (str. 10)
3. Nasadte svému mazlíčkovi přední postroj (str. 11)
4. Umístěte svého mazlíčka na invalidní vozík:

Nyní, když váš mazlíček nosí přední postroj, je připraven začít. Invalidní vozík by měl být umístěn s prodlužovacími nástavci nakloněnými dolů na zem. Posadte se za invalidní vozík, zvedněte zadní nohy svého mazlíčka a vložte nohy do nožních kroužků (pokud je váš mazlíček lehký, můžete ho k tomu zvednout). Když jsou nohy skrz kroužky, vytáhněte nástavce (boční tyče). Protáhněte každý nástavec skrz D-kroužek na předním postroji a zaklapněte na místo.

Instruktažní videa: hpets.net/swi

5. Jak nasadit psa (úpravy str. 13)

Tipy pro přizpůsobení invalidního vozíku vašemu mazlíčkovi:

- Výška: Všechny čtyři polštářky obou zadních tlapek se dotýkají země
- Délka: Boční nástavce nepřesahují střed přední nohy a zadní boky jsou vycentrovány černým kloubem
- Šířka: ½" - 1" mezi tělem a rámem invalidního vozíku v nejširší části vašeho mazlíčka (obvykle hrudník)



Perri

Části zadní části Walkin' Wheels®

Malý invalidní vozík



Hliníkový rám invalidního vozíku s šířkovým konektorem a Extendery nainstalovány.



Konektory šířky 4" nainstalované v rámu. Použijte 7" pro širší psy.



Prodlužovače délky
Prodlužovače jsou instalované v rámu.



Koleno
Přípevněno k rámu.



Sada nářadí s imbusovým klíčem a miskovitě šrouby pro snížení hluku; v případě potřeby použijte.



Kroužky na nohy pro zadní podporu.



One Belly Belt pro podporu střední části; použijte v případě potřeby.



Třmeny, aby se nohy netáhly; použijte v případě potřeby.



Přední postroj s pohodlné rukávy, plně nastavitelné.



Kolečka, která jsou součástí invalidního vozíku, budou odrazovat těžené podle váhy vašeho mazlíčka

Naučte svého psa používat Walkin' Wheels®

Walkin' Wheels® jsme vytvořili se záměrem, že si nastavíte invalidní vozík, posadíte do něj svého mazlíčka a za pár okamžiků ho budete znovu sledovat, jak běhá a hraje si. Může se to tak stát, ale ne vždy. Invalidní vozík může být úpravou pro zvíře. Pro některé je podivné zařízení, které ho/ji sleduje, vydává podivné zvuky a zachycuje se na nábytku a dveřích. Přizpůsobí se těmto změnám, ale potřebují trochu času.

Při prvním nasedání na invalidní vozík doporučujeme být klidný, tichý a pomalý. Dopřejte svému mazlíčkovi spoustu pozitivního posílení a ujištění. I pamlsky pomáhají! Nechte svého mazlíčka zvyknout si na postroj, než jej připevníte na invalidní vozík. Může trvat několik minut až několik hodin, než si váš pes zvykne na postroje.

Na další stránce najdete důležité tipy krok za krokem, jak začít proces zvykání vašeho mazlíčka na Walkin' Wheels a začít na cestě k druhé šanci na aktivní život.



1. Při zahájení tohoto procesu doporučujeme, abyste použili domácí mazlíčky oblíbené pamlsky, které odmění vašeho mazlíčka za chůzi vpřed. Tyto pamlsky nebudete muset používat každý den, jen na začátku tréninkového procesu. Hladový mazlíček je motivovaný mazlíček! Pracujte se svým mazlíčkem předtím, než ho nakrmíte. Bude více toužit dávat pozor a získat odměnu za jídlo, pokud bude mít hlad.
2. Nedávejte svého mazlíčka okamžitě na invalidní vozík. Sestavte invalidní vozík a ponechte jej na místě, kde ho váš mazlíček může vidět, cítit a dotýkat se ho.
3. Jakmile se váš mazlíček pohodlně usadí u vozíku, nasadte si přední postroj a nechte ho chvíli o samotě. Nechte svého mazlíčka zvyknout si na pocit popruhů.
4. Když se váš mazlíček cítí pohodlně, zkuste ho/ji umístit do podpůrného systému nožního kroužku a připevněte přední postroj k invalidnímu vozíku. Dejte mu/jí pamlsky pro pozitivní asociaci.
5. Poté, co je váš mazlíček na invalidním vozíku, držte odměnu za jídlo přímo v úrovni jeho nosu. Krmte několik kusů. Poté můžete ustoupit jednou nohou vzad a opět držet před sebou odměnu za jídlo. Poté by měla jít směrem k vám, aby si vzala pamlsky. Než se nadějete, chodí ve svých Walkin' Wheels®! Opět dejte pamlsky a pozitivní pochvalu.
6. Pracujte ve velmi krátkých (5-10) minutových sezeních, několikrát denně. Dopřejte svému mazlíčkovi přestávky mezi jednotlivými sezeními.

Poznámka: Nejprve mějte pohyb svého mazlíčka pod kontrolou. Udržujte svého mazlíčka na volném místě a na krátkém vodítku. Pokud se váš mazlíček vyděsí, odpojte postroj od invalidního vozíku a zkuste to znovu později.

Dokud si váš mazlíček nezvykne na Walkin' Wheels®, omezte čas strávený v nich. Walkin' Wheels® jsou navrženy tak, aby umožnily vašemu mazlíčkovi cvičit a fyzioterapii. Domácí mazlíčci si nemohou na vozíku lehnout, ale budou se moci na vozíku vymočít a vyprázdnit. Začněte s krátkými periodami a pomalu zvyšujte. Ujistěte se, že to první den nepřeženete.


Nastavení invalidního vozíku pro psa:

Pomocí Snap Buttons upravte délku, šířku a výšku



- Boční tyč by měla probíhat paralelně se zemí středem těla.

- Boční tyče by měly končit u lopatek.

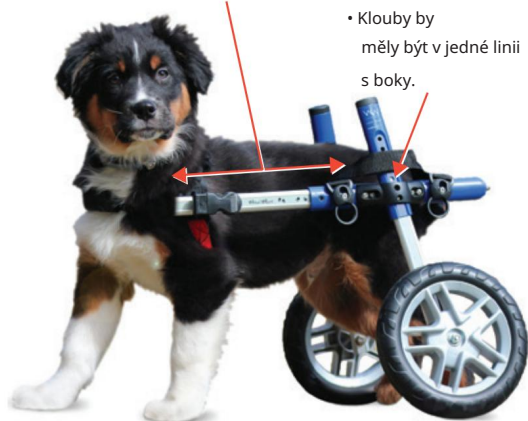

- Klouby by měly být v jedné linii s boky.

Snap Buttons představují snadný způsob, jak upravit délku, šířku a výšku invalidního vozíku Walkin' Wheels®. Pomocí imbusového klíče stiskněte západkové tlačítko, když je uvnitř kloubu, abyste mohli upravit výšku.

Úprava délky

Poznámka: Pokud máte nástavec na přední kolo, odstraňte nástavce a přejděte na str. 16.



Prodlužovače slouží k úpravě délky. Sada je dodávána s jednou sadou. Chcete-li nastavit nástavce, stiskněte západkové tlačítko a posuňte se na požadovanou délku. Levá a pravá jsou reverzibilní.


Je délka správná?

Konec nástavců by měl být umístěn ve středu lopatek vašeho mazlíčka. Prodlužovače by se měly dotýkat neoprenových vycpávek na předním postroji a neměly by se vytahovat ven.

Nastavení šířky

Pomocí západkových tlačítek na šířkovém konektoru nastavte invalidní vozík na správnou šířku. Nastavení šířky bude určeno nejširší částí vašeho mazlíčka, což je obvykle hrudník. Invalidní vozík by měl být ½" - 1" od nejširší části těla vašeho mazlíčka. Šířkový konektor, který je dodáván s rámem, je dlouhý 4" a rozšíří se na 6,5". Součástí je také konektor šířky 7" pro domácí mazlíčky, kteří potřebují větší šířku (7"-9").

Pokud potřebujete náhradu, zavolejte nám na číslo (888) 253-0777. Chcete-li objednat 7 nebo 10" konektor, nebo objednat z našeho seznamu náhradních dílů: www.WalkinPets.com/connectors

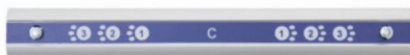

Přípevnění vzpěr a kol Svůj invalidní vozík

jste obdrželi se správnou velikostí kombinace vzpěry a kol podle rozměrů a hmotnosti zadních nohou vašeho mazlíčka. Vložte vzpěru do nohy invalidního vozíku a nastavte požadovanou výšku. Kola jdou zvenku. Pokud si myslíte, že potřebujete jinou velikost kola a vzpěry, kontaktujte nás.




Nastavení výšky Správné


nastavení výšky závisí na výšce a stavu vašeho domácího mazlíčka. Pokud váš mazlíček používá zadní nohy, použijte tlačítka pro nastavení výšky tak, aby se všechny čtyři polštářky každé zadní tlapy právě dotýkaly země. Pokud jsou zadní nohy velmi slabé nebo ochrnuté a škrábou nebo kloužou, vložte nohy do třmenů (abyste je udrželi od země) nebo je chraňte botami Walkin'® Pet Boots (viz str. 21).

Při dodání se váš invalidní vozík vejde pro většinu malých domácích mazlíčků. Existuje však další úprava, kterou lze provést pro další zvýšení výšky. Nohy mohou být v nastavení HIGH nebo LOW (viz fotografie na str. 3 a 5). Invalidní vozíky se obvykle dodávají s kolečky v nastavení LOW.

Na DVD a online je podrobné video „HOW TO“: <https://www.youtube.com/watch?v=CxuAgcBzZpQ>

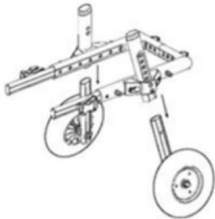

Pozice krátkých nohou

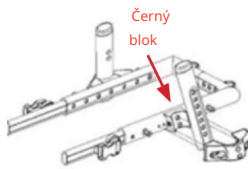

Odstraňte kloub a znovu umístěte nohu, která drží kolo



Pozice dlouhých nohou

Ke změně polohy nohy použijte křížový šroubovák:

1. Pomocí tlačítka sejměte kolo/vzpěru z nohy.
2. Povolte kloub křížovým šroubovákem, šrouby ponechte a podložky na místě.
3. Přemístěte nohu na vysoké nastavení, kde vidíte dva otvory na vnitřní straně nohy. Díky tomu je o 2" vyšší.
4. Vyrovnejte kloub a znovu utáhněte šrouby v kloubu.




5. Ujistěte se, že jsou podložky na místě uvnitř šrouby. Ujistěte se, že malý černý blok není nainstalován obráceně. Upravujte jednu stranu po druhé, protože levý a pravý kloub se liší. Uvnitř plastového kloubového bloku uvidíte L nebo R označující správnou polohu. Ujistěte se, že to není vzhůru nohama!

Třmeny

Třmeny jsou volitelné pro tlapy, které se vlečou nebo kloužou. Třmeny se připevňují k zadní části invalidního vozíku na každé stříbrné kovové smyčce. Gumové hadičky na třmenech musí být nad hlezenním kloubem vašeho mazlíčka. Pomocí aretace se přizpůsobte tak, aby přiléhala. Noha vašeho mazlíčka by měla být několik centimetrů nad zemí. Délku šňůrky můžete upravit opětovným zavázáním uzlu. Pokud používáte třmeny, použijte oba. Použití pouze jednoho třmenu způsobí, že se váš mazlíček bude cítit nevyváženě.

DŮLEŽITÉ: Když vytahujete zvíře z vozíku, ujistěte se, že jste nejprve uvolnili třmeny.

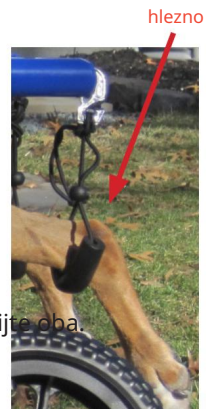

Zadní opěrné nožní kroužky

Nožní kroužky podporují zadní končetiny vašeho mazlíčka. Sníží váhu z nohou a zároveň umožní vašemu mazlíčkovi používat nohy k udržení svalové hmoty. Nožní kroužky by neměly viset níže než 3" pod rámem. To vytvoří podpůrnou kolébkku.



Opravit

Nesprávný

Když je váš mazlíček v kroužcích na nohy, kloub invalidního vozíku by měl být vycentrován s kyčelním kloubem. Nožní kroužky by měly vypadat jako dvě C, ne dvě V, přičemž středový konektor je drží pohromadě.

Připněte kroužky na nohy k invalidnímu vozíku



Popruhy Leg Ring jdou přes horní část rámu a černé plastové spony popruhů mají šterbinu, která se hodí přes šrouby Ramenní zásuvky. Vložte palec do kulatého kruhu a zatlačením nahoru zajistíte (uslyšíte, jak zapadne na místo). Kulatý kruh bude směřovat k zemi. Nohy vašeho mazlíčka procházejí každým kroužkem.



Ramenní nástrčný šroub

Pro uvolnění dejte palec do kruhu a zatáhněte směrem dolů. Nyní můžete pomalu spustit svého mazlíčka na zem. Přebytečný pásek Velcro® může přecházet přes záda vašeho domácího mazlíčka nebo Velcro® dohromady tvoří rukojeti (viz fotografie str. 11).

Středový konektor Velcro® lze posunout dopředu nebo dozadu

vyhněte se tlaku na genitálie vašeho domácího mazlíčka (ideální pro intaktní domácí mazlíčky).

Konektor na suchý zip lze navíc volně omotat, takže mezi kroužky je prostor. **MUSÍ** být použit středový konektor na suchý zip. Upravte pro nejlepší pohodlí a přizpůsobení.



Přebytečný pásek Velcro® na kroužcích nohou se může křížit přes zadeček.
nebo

Velcro® dvě strany k sobě a tvoří rukojeti.



Přezovou hadičku lze v případě potřeby zkrátit (nepřeřezávat pásku). Zkuste odříznout asi 1/2" ze všech čtyř konců gumy a poté upravte tri-kluzáky na páscích, abyste je utáhli.



Upevnění předního postroje



Nastavte prodlužovače tak, aby dosáhly na spony postrojů na předním postroji. Prodlužovací konce projdou každým D-kroužkem a poté se zacvaknou do předního postroje. D-kroužky by měly být umístěny těsně za lopatkami.



Nastavení předního popruhu:

- Sundejte z postroje tři černé pohodlné rukávy, abyste mohli upravit velikost.
- Hlava vašeho mazlíčka prochází mezi černými popruhy.
- Červený pásek jde za přední nohy a klipsy



- do strany postroje.
- Mužské hroty směřují dozadu a připevňují se k invalidnímu vozíku.
- Všechny tři popruhy by měly přiléhat.
- Pohodlné rukávy lze zkrátit na polovinu pro menší domácí mazlíčky a přebytečná ramínka zastrčit. Tento materiál se nebude třepit.

Je invalidní vozík správně nastaven?

Zkontrolujte níže uvedené položky, abyste se ujistili, že je invalidní vozík správně upevněn. Pokud si stále nejste jisti, zda sedí, pošlete nám e-mail s fotografiemi zadního a bočního pohledu vašeho psa na invalidním vozíku na adresu: helpme@walkinpets.com a my vyhodnotíme přizpůsobení. Ujistěte se, že jste uvedli, pod jakým jménem byl invalidní vozík objednáán a číslo vašeho telefonu nebo prodejního dokladu.



Když je vozík správně nastaven, bude váš mazlíček stát v přirozené poloze. Zde je co zkontrolovat:

- A** Klouby by měly být centrovány s boky.
- B** Spony D-Ring předního postroje: zacvakněte do prodlužovačů za lopatkou. Žáda by měla být rovná.
- C** Prodlužovače jsou rovnoběžné se zemí a nepřesahují střed předních nohou.
- D** Všechny čtyři polštářky obou zadních tlapek se dotýkají země nebo **E** třmeny umístěné nad hlezenním kloubem.



Nesprávný

Pokud se nástavce nakloní nahoru, uvolněte černý popruh na předním postroji přes záda vašeho mazlíčka a utáhněte červený spodní popruh.



Nesprávný

Pokud se nástavce nakloní dolů, uvolněte červený spodní pásek a utáhněte černý pásek přes záda vašeho mazlíčka, abyste nástavce zvedli.



Opravit


Boční nástavce by měly být rovnoběžné se zemí a uprostřed těla vašeho mazlíčka.

Pokud máte corgiho nebo jezevčíka, boční tyče se vpředu nakloní dolů, protože jejich zadní nohy jsou delší než přední nohy.

Volitelné stavěcí šrouby pro redukci hluku

Použití stavěcích šroubů není nutné, ale utáhne váš invalidní vozík a sníží případné drnčení. Stavěcí šrouby také udržují invalidní vozík pevný poté, co byl nastaven pro vašeho domácího mazlíčka. Když invalidní vozík utáhnete, boční ramena, nazývaná prodlužovače, se budou moci pohybovat nahoru a dolů, jak váš mazlíček zatáhá. To je zcela normální. Flexibilita také umožňuje snadný pohyb na nerovném terénu. Existuje šest míst pro umístění stavěcích šroubů pomocí imbusového klíče. Níže jsou označeny červenými šipkami.

Poznámka: Před prováděním úprav se ujistěte, že jsou níže uvedené stavěcí šrouby uvolněny nebo odstraněny.

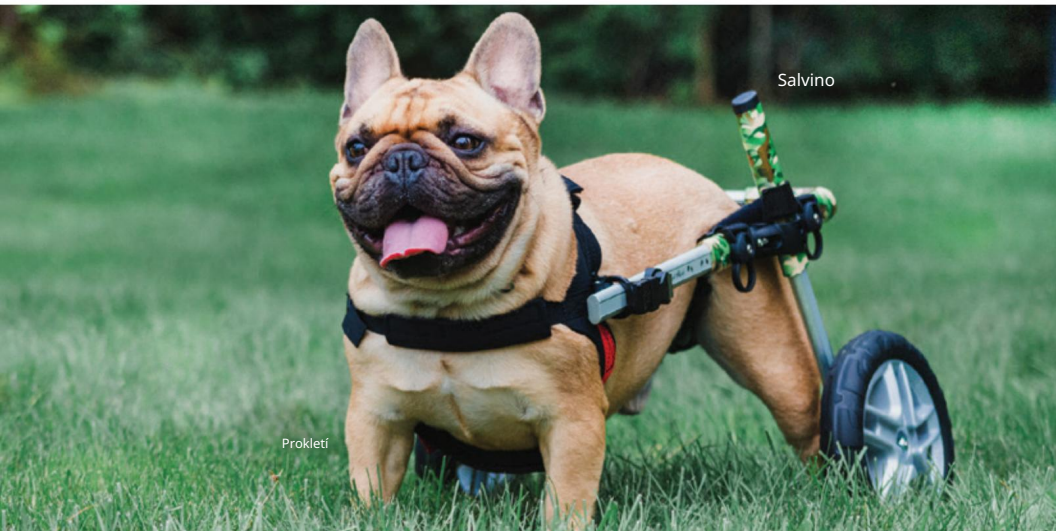

Břišní pás, pokud je potřeba

Některá zvířata budou potřebovat další podporu pod břichem. Můžete určit, zda váš mazlíček potřebuje další podporu, pokud se jeho páteř sklání dolů. Je také užitečný pro domácí mazlíčky s nadváhou nebo s problémy s páteří nebo ploténkami. Jeden konec břišního pásu má připevňový tri-glide (obdélníkový s tyčí uprostřed) a druhá strana má pásek Velcro®.

Na obou stranách je lano s tlačítkem (pokyny na str. 16).



A. Vezměte stranu s triglidem a protáhněte prodlužovač koncem smyčky.



B. Vezměte lano a vložte jej dovnitř spona postroje na prodlužovači (B). Poté připojte přední postroj ke sponě postroje, abyste zajistili lano. Břišní pás tak nebude klouzat dozadu. Nyní upravte břišní pás tak, aby byl uprostřed břicha vašeho mazlíčka.



C. Zajistěte druhou stranu přes nástavec a suchý zip na spodní části břišního pásu. Účelem břišního pásu je poskytnout podporu střední části vašeho mazlíčka.

Pokud váš mazlíček potřebuje více podpory, můžete si zakoupit Walkin' Belly Support: www.WalkinPets.com/walkin-belly-support



Tato část je určena pro sestavení plně podpůrného (čtyřkolkového) invalidního vozíku

Upevnění předního kola Walkin' Wheels®

(kupuje se samostatně)




Walkin' Wheels® Front Wheel Attachment poskytuje pohyblivost domácím mazlíčkům se slabostí předních nebo všech čtyř nohou. Je ideální pro pomoc postiženým mazlíčkům při cvičení a pro rehabilitaci, když se hojí.

Stejně jako ostatní produkty Walkin' Wheels® je nástavec na přední kolo nastavitelný, takže se vejde na invalidní vozík Walkin' Wheels® pro domácí mazlíčky jakékoli velikosti od 11 do 25 liber a lze jej kdykoli snadno odstranit.

V balení Nástavec

na přední kolo lze snadno sestavit a zacvaknout do invalidního vozíku. Budete potřebovat křížový šroubovák.

Balíček obsahuje:

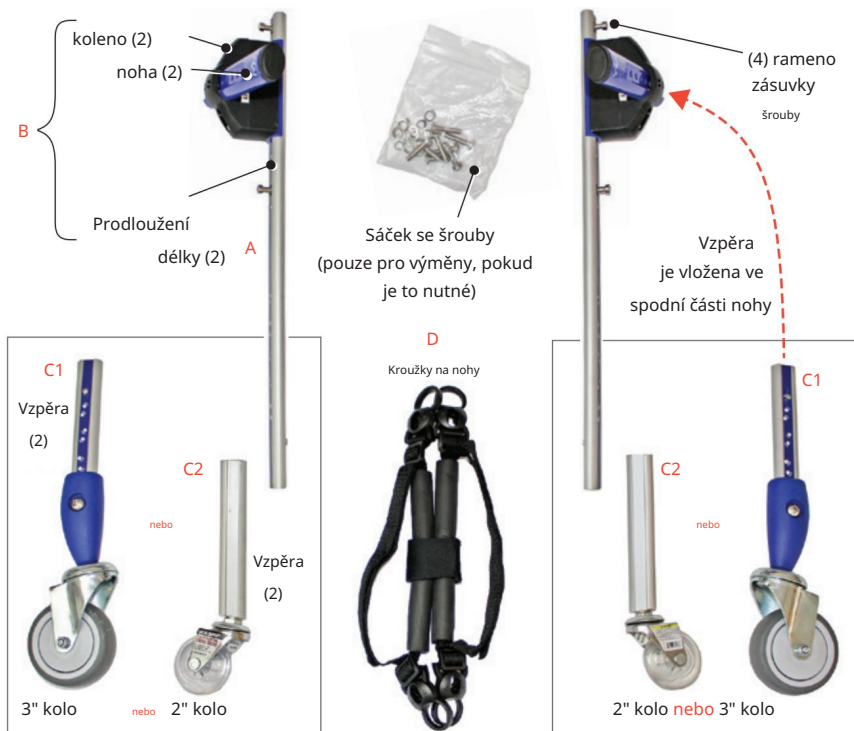

DŮLEŽITÉ: LEVÁ a PRAVÁ vzpěra a kolečka musí odpovídat

LEVÁ a PRAVÁ NOHA. Pokud nejsou správně nainstalovány, bude se invalidní vozík extrémně kývat. Označujeme L a R, jako by byl váš mazlíček na invalidním vozíku.

Montáž plně podpěrného invalidního vozíku Video instrukce jsou také k

dispozici: hpets.net/sfav

Krok 1: Délka: Levý a pravý nástavec (A & B)

Vyjměte stávající boční nástavce na zadním invalidním vozíku a nahradte je nástavci předních kol. Zásuvné ramenní šrouby (4) budou na vnější straně invalidního vozíku a slouží k připevnění nožních kroužků.

Krok 2: Výška: Vzpěry a kola (C1 nebo C2)

Vložte vzpěry do nohou a ujistěte se, že levá a pravá jsou na správné straně.

Krok 3: Kroužky na nohy (D)

Nainstalujte nožní kroužky (str. 10). Popruhy jdou přes rám; vložte černou plastovou sponu na šroub s vnitřním šestihranem a zatlačte nahoru.

Když zapadne na místo, uslyšíte cvaknutí. Kroužky na nohou by měly vypadat jako dvě C, ne dvě V (str. 10).

Nohy vašeho mazlíčka půjdou dovnitř každého kroužku, aby podepřely jeho/její tělo vpředu.

Přední nožní kroužky mohou být nižší než zadní nožní kroužky, aby

vyhovovaly plnému hrudníku psa. Chcete-li odstranit kroužky na nohy, vložte palec do kruhu a zatáhněte dolů.



Ujistěte se, že všechna R a L jsou na správných stranách.

Krok 4: Šířka: Upravte

šířku podle hrudníku vašeho mazlíčka (obvykle nejširší oblast).



Boční pohled (3" kola)



Pohled zepředu (2" kola)

Uvedte svého mazlíčka do režimu plné podpory (čtyřkolka) Invalidní vozík

Po sestavení plně podpěrného invalidního vozíku umístěte nohy svého mazlíčka do každého nožního kroužku. Další popruhy z nožních kroužků můžete překřížit přes tělo nebo suchý zip a vytvořit rukojeti (str. 11).

Výška: Nastavte výšku tak, aby se všechny čtyři polštářky na předních tlapkách vašeho mazlíčka dotýkaly země. Nástavce musí být rovnoběžné se zemí.

Délka: Přední noha zvířete by měla být vystředěna mezi dvěma šrouby s vnitřním ramenem.

Šířka: Šířka je určena nejširší částí psa (obecně hrudníkem psa). Ponechte na obou stranách alespoň centimetr místa.

Kroužky na nohy: Kroužky na nohy vpředu musí být obecně o něco níže než vzadu, aby se přizpůsobily hlubšímu hrudníku vašeho mazlíčka. Podle toho upravte nožní kroužky.



Volitelné položky a příslušenství

Walkin'® Lift Harness

www.WalkinPets.com/walkin-lift-rear-harness



Walkin'® Lift Harness se používá k podpoře zadních částí vašeho mazlíčka. Tento postroj je kompatibilní s invalidním vozíkem Walkin' Wheels® a lze jej použít místo kroužků na nohy. Tento postroj je dodáván s úchyty pro snadné zvedání a chůzi.

Přední postroj Walkin' Warrior

www.handicappedpets.com/walkin-warrior-front-harness



Zadní postroj Walkin' Warrior poskytuje podporu zadním nohám, kterou váš pes potřebuje, aby se dostal zpět na nohy. Bezpečně podepřete zadní nohy svého psa a jemně zvedněte jejich zadní konec, abyste si oba mohli užít každodenní procházku. Tento zvedací postroj pro velké zatížení je plně kompatibilní s invalidním vozíkem pro psy Walkin' Wheels.

Zadní postroj Walkin' Warrior

www.handicappedpets.com/walkin-warrior-rear-harness



Zadní postroj Walkin' Warrior poskytuje podporu zadním nohám, kterou váš pes potřebuje, aby se dostal zpět na nohy. Bezpečně podepřete zadní nohy svého psa a jemně zvedněte jejich zadní konec, abyste si oba mohli užít každodenní procházku. Tento zvedací postroj pro velké zatížení je plně kompatibilní s invalidním vozíkem pro psy Walkin' Wheels.

U předních, zadních nebo obou postrojů Warrior jednoduše odepněte nastavitelné rukojeti postroje a vyměňte stávající zadní nožní kroužky za zadní postroj Warrior pro pohodlnou zadní část.

Podpěra, podpora. Postroj vám umožní podepřít a stabilizovat vašeho psa, když ho zvednete na invalidní vozík, takže nastupování a vystupování z invalidního vozíku je hračka.



Volitelné položky a příslušenství (pokračování)

Malá přední vesta Walkin'®

www.WalkinPets.com/walkin-small-front-vest



Tato vesta je určena pro menší plemena psů se širokým hrudníkem jako jsou jezevčáci nebo mopsíci.

Tato vesta vhodná pro invalidní vozíky je vyrobena z odolného neoprenového materiálu se suchým zipem na břicho a přední části krku.

Neoprenový přední postroj pro čtyřkolku

www.WalkinPets.com/walkin-wheels-front-neopren-harness



Nový přední neoprenový postroj se používá k podpoře předních nohou vašeho mazlíčka. Tento postroj je kompatibilní s invalidním vozíkem Quad Walkin' Wheels® a lze jej použít místo kroužků na nohy pro extra podporu a pohodlí.

Kryt na amputaci

www.WalkinPets.com/amputee-leg-ring-cover



Kryt na amputaci je určen pro domácí mazlíčky s hladkou amputací a pracuje s kroužky na nohou. Potah se nasune přes nožní kroužek a uzavře jednu stranu pro pohodlí.

Walkin'® Belly Support

www.WalkinPets.com/walkin-belly-support



Walkin'® Belly Support pomáhá poskytnout dodatečnou podporu pro záda vašeho mazlíčka, když je na invalidním vozíku Walkin' Wheels®. Břišní podpěra, vyrobená z lehké, ale pevné neoprenové tkaniny, pomáhá zvednout střed těla vašeho mazlíčka a zmírnit tak nepřiměřený tlak na jeho záda. To je zvláště užitečné pro domácí mazlíčky s delším tělem nebo pro ty, kteří mají jakýkoli typ poranění páteře nebo zad.

Walkin'® Drag Bag

www.WalkinPets.com/walkin-drag-bag



Taška Walkin' Wheels® Drag Bag je navržena pro domácí mazlíčky k použití v domácnosti, když nejsou na židli. Skvělé pro ochranu hrudníku a končetin. Zabraňuje oděrkám a vředům, které mohou být způsobeny škrábáním o koberce, podlahy a drsné povrchy.

Walkin' Scooter

www.WalkinPets.com/walkin-small-front-vest



Walkin' Scooter pro domácí mazlíčky je navržen tak, aby váš mazlíček byl v pohodlí a byl vždy na cestách! Walkin' Scooter umožňuje domácím mazlíčkům, aby se mohli volně pohybovat po domě a zároveň snadno manévrovali kolem vnitřních překážek. Walkin Scooter je ideální, když váš mazlíček nepoužívá svůj invalidní vozík Walkin' Wheels

Walkin'® Pet Boots

www.WalkinPets.com/walkin-pet-boots-for-dogs-and-cats



Vysoce kvalitní pevné boty zabrání vašemu mazlíčkovi, aby se dostal do domu špíny, bláta nebo sněhu. Pomáhá domácím mazlíčkům, kteří tahají tlapy, a poskytuje jistotu na kluzkých površích, jako jsou podlahy z tvrdého dřeva. Ideální pro domácí mazlíčky s řeznými ranami, modřinami nebo citlivými tlapkami.

Tréninkové ponožky No-Knuckling

www.WalkinPets.com/no-knuckling-training-sock



Tréninková ponožka No-Knuckling by měla být používána jako dočasný tréninkový nástroj. Je určen pro krátkodobé, vícenásobné použití, aby pomohl opravit chůzi a zlepšit umístění zadní tlapy. Nemělo by se nosit déle než 2-5 minut v kuse.



Handicapped Pets Foundation www.hpets.org

Handicapped Pets Foundation je nezisková

společnost 501(c)3, která se věnuje zdraví a pohodě stárnoucích, postižených a zraněných domácích mazlíčků. Jejím posláním je prodloužit život domácím mazlíčkům tím, že jim pomůžete pohybovat se, aby mohli získat pohyb, který potřebují k dlouhému, šťastnému a zdravému životu; Nadace pro tento účel věnuje invalidní vozíky domácím mazlíčkům v nouzi.

Můžeš pomoci!

Dary jsou vděčně přijímány (šeky

splatné nadaci Handicapped Pets Foundation) a lze je poslat na adresu:

Handicapped Pets Foundation 14 Veterans Road, #22, Amherst, NH 03031

Členský program AARF All-Inclusive Walkin' Wheels

www.handicappedpets.com/aarf-membership-program

Členský program AARF All-Inclusive poskytuje 50% slevy na náhradní díly invalidních vozíků a 50% slevy na invalidní vozíky Příslušenství.



Slevy na náhradní díl lze využít až dvakrát za jeden náhradní díl ročně.

Slevy na příslušenství pro invalidní vozíky lze využít neomezeně mnohokrát.

Opotřebení, údržba, odpovědnost a záruka

Při správném používání a údržbě je invalidní vozík navržen tak, aby vydržel po celý život. Pokud potřebujete náhradní díly pro kola, postroje a další opotřebované položky, můžete je zakoupit na adrese www.WalkinPets.com/spare-parts.

Rám vozíku nerezaví. Pokud se do invalidního vozíku dostane nečistota nebo písek, můžete jej opláchnout hadicí. Všechny součásti lze vyjmout a vyčistit. Olejování není nutné.

Omezená odpovědnost

Walkin' Wheels® se poskytuje jako pomůcka pro chůzi pro zvířata, která jsou v péči veterináře a pro která byl doporučen invalidní vozík. Společnost Wheels for Pets, LLC a její přidružené společnosti, zástupci a distributoři nijak neručí za účinnost nebo vhodnost tohoto produktu.

Záruka

Na rám invalidního vozíku Walkin' Wheels® poskytuje výrobce, společnost Wheels for Pets, LLC, záruku po dobu pěti let od data nákupu na vady materiálu nebo zpracování.

Pokud se rám při běžném používání rozbije, dejte nám prosím vědět a my invalidní vozík opravíme nebo vyměníme dle našeho uvážení. Jste odpovědní za všechny poplatky za dopravu. Záruka platí pro původního majitele a je nepřenosná.

Reklamační řád

Jsmo tu, abychom pomohli vašemu mazlíčkovi, aby co nejlépe seděl. Pokud se vyskytne problém, který nedokážeme vyřešit pomocí montážní pomoci, kontaktujte nás do 30 dnů ode dne, kdy invalidní vozík dorazil, a my vám vystavíme autorizační číslo pro vrácení (RA). Pokud je nutná renovace kvůli poškrábání nebo opotřebení, sníží se tím vaše refundace. RA# musí být napsáno na vnější straně přepravní krabice a musí být vyplněn formulář pro vrácení, aby bylo možné zvážit vrácení peněz.

www.WalkinPets.com/return-policy-walkin-wheels



ZÁZRAKY V POHYBU



Walkin' Pets
by handicappedpets.com

105 Rt 101A, Suite 18 • Amherst, NH 03031 • (888) 253-0777
www.WalkinPets.com

Patenty: US 7549398 • Japonsko 5385584 • Kanada 2641092 • EPO 2 050 418
Ochranné známky: Walkin' Wheels® 4,765,026 • 4,882,354 • 3,725,405 • 4,765,026
dalších patentů a nevyřízených ochranných známek.