



VELKÝ RÁM s volitelným  
uchycením předního kola s plnou podporou



Brutus

Děkujeme, že jste si zakoupili invalidní vozík pro psy Walkin' Wheels® Large.

Otázky nebo připomínky? Zavolejte nám

na: (603) 577-8854 nebo nám napište na adresu: [HelpMe@WalkinPets.com](mailto:HelpMe@WalkinPets.com)

## Obsah

Rychlý návod .....	3
Části zadního velkého invalidního vozíku Walkin' Wheels®.....	4 Naučte svého psa
používat Walkin' Wheels® . .....	5
Nastavení invalidního vozíku pro psa.....	7
Pomocí Snap Buttons upravte délku, šířku a výšku. ....	8
Úprava délky .....	9
Je délka správná? .....	9
Nastavení šířky .....	10
Upevnění vzpěr a kol .....	10 Nastavení
výšky .....	10 Připněte nožní kroužky k invalidnímu
vozíku.....	11 Třmeny.....
12	
Upevnění předního postroje .....	13
Změna umístění kapsy D-kroužku .....	13 Je invalidní vozík správně
nastaven? .....	15 Volitelné stavěcí šrouby pro Snížení
hluku .....	16
Břišní pás, je-li potřeba .....	16
Možnosti kola .....	17
Pěnová kola .....	17
Vzduchové pneumatiky .....	17
Walkin' Wheels® Upevnění předního kola .....	18
V balíčku .....	19
Sestavení plně podpěrného invalidního vozíku .....	19 Umístění vašeho psa do
Plně podpůrný (čtyřkolkový) invalidní vozík .....	22
Opotřebením, údržba, odpovědnost a záruka .....	23
Volitelné položky a příslušenství .....	24 kniha Nadace
handicapovaných mazlíčků, SPZ a zázrační psi....	27

## Rychlý návod

1. Nastavte délku invalidního vozíku (str. 9), výšku (str. 10) a šířku (str. 10)
2. Připevněte nožní kroužky k invalidnímu vozíku (str. 11-12)
3. Nasadte psovi přední postroj (str. 13)
4. Umístěte psa na invalidní vozík: Nyní, když má váš pes na sobě přední postroj, je připraven začít. Invalidní vozík by měl být umístěn s prodlužovači na zemi. Posadte se za invalidní vozík, zvedněte zadní nohy nahoru a umístěte nohy psů do nožních kruhů. Když jsou nohy skrz kroužky, vytáhněte nástavce (boční tyče). Protáhněte každý nástavec skrz D-kroužek na předním postroji a zaklapněte na místo.

Video:

[www.walkinpets.com/all-sizes-dog-wheelchair-instructional-videos](http://www.walkinpets.com/all-sizes-dog-wheelchair-instructional-videos)

5. Jak nasadit psa (úpravy str. 15)

Tipy pro nastavení délky a šířky, když je pes na invalidním vozíku:

Zadní špičky se jen dotýkají země

Boční nástavce nepřesahují přední nohu

Zadní šířka je stejná jako šířka hrudníku



## Části Walkin' Wheels® Zadní velký invalidní vozík



Hliníkový rám  
invalidního vozíku; Šířka  
Nainstalovaný konektor



Šířkové konektory.  
9" konektor je  
nainstalované v rámu



Prodlužovače délky.  
26" nástavce jsou instalovány  
v rámu



Kloub  
(připojený k rámu)



Sada nářadí s imbusovým klíčem  
a miskovitými šrouby pro snížení  
hluku (použijte v případě potřeby)



Kroužky na nohy  
pro zadní podporu



Jeden břišní pás pro  
podporu střední části  
(použijte v případě potřeby)



Třmeny, aby se nohy netahaly  
(použijte v případě potřeby)



Přední postroj s  
pohodlné rukávy,  
plně nastavitelné



Kola připevňná ke vzpěrám  
(jedna sada pro každý invalidní vozík)  
12" a 16" zobrazena zde

## Naučte svého psa používat Walkin' Wheels®

Walkin' Wheels® jsme vytvořili se záměrem, že si nastavíte invalidní vozík, posadíte do něj svého mazlíčka a za pár okamžiků ho budete znovu sledovat, jak běhá a hraje si. Může se to tak stát, ale ne vždy. Invalidní vozík může být úpravou pro zvíře. Pro některé existuje podivné zařízení, které ho sleduje, vydává podivné zvuky a zachycuje se na nábytku a dveřích. Přizpůsobí se těmto změnám, ale potřebují trochu času.

Při prvním nasedání na invalidní vozík doporučujeme být klidný, tichý a pomalý. Dopřejte svému mazlíčkovi hodně hlazení a ujistění. I pamlsky pomáhají! Nechte psa zvyknout si na postroj, než jej připevníte na invalidní vozík. Může trvat několik minut nebo několik hodin, než si váš pes zvykne na postroje.



1. Při zahájení tohoto procesu doporučujeme využít přízně psa pamlsky jako odměna vašeho psa za chůzi vpřed. Tyto pamlsky nebudete muset používat každý den, pouze na začátku tréninkového procesu. Hladový pes je motivovaný pes! Pracujte se svým psem předtím, než ho nakrmíte. Bude dychtivější dávat pozor a získat odměnu za jídlo, pokud bude mít hlad.
2. Nedávejte svého psa okamžitě na invalidní vozík. Sestavte invalidní vozík a ponechte jej v oblasti, kde jej váš pes může vidět, cítit a dotýkat se ho.
3. Jakmile je pes pohodlně blízko vozíku, umístěte přední část připoutejte se a nechte ho chvíli o samotě. Nechte psa zvyknout si na pocit popruhů.
4. Když se váš pes cítí pohodlně, zkuste ho umístit do opěrného systému pro nohy a připevněte přední postroj k invalidnímu vozíku. Dejte mu pamlsky pro pozitivní asociaci.
5. Poté, co je váš pes na vozíku, držte odměnu za jídlo přímo v úrovni jeho nosu. Nakrmte ho několika kusy. Poté můžete posunout jednu nohu dozadu a opět držet před sebou odměnu za jídlo. Pak by měl jít směrem k vám pro pamlsky. Než se nadějete, chodí ve svých Walkin' Wheels®! Opět mu dejte pamlsky a pozitivní pochvalu.
6. Pracujte ve velmi krátkých (5-10) minutových sezeních, několikrát denně. Dát přestávky vašeho psa mezi jednotlivými sezeními.

Poznámka: Zpočátku mějte pohyb psa pod kontrolou. Udržujte psa na volném místě a mějte ho na krátkém vodítku. Pokud se pes lekne, odpojte postroj od vozíku a zkuste to znovu později.

Dokud si váš pes na Walkin' Wheels® nezvykne, omezte čas strávený v nich. Walkin' Wheels® jsou navrženy tak, aby vašemu psovi umožnily cvičení a fyzickou terapii. Psi si nemohou lehnout na invalidní vozík, ale budou moci na vozíku močit a vyprázdnit se.

Začněte s krátkými periodami a pomalu zvyšujte. Ujistěte se, že to první den nepřezene. Poté, co si váš pes na vozík zvykne, může v něm být 1 hodinu v kuse. Pak ho budete muset vzít ven, aby si odpočinul. Zde je video ke shlednutí, jak sestavit invalidní vozík: [www.walkinpets.com/large-dog-wheelchair-instrukcni-vidia](http://www.walkinpets.com/large-dog-wheelchair-instrukcni-vidia)

## Nastavení invalidního vozíku pro psy

### Nastavení kloubu Rám je

dodáván plochý. Vyjměte z krabice s nálepkou s nápisem „THIS SIDE UP“. Nastavte nožičky kolmo k rámu otáčením krytek číselníku proti směru hodinových ručiček, abyste uvolnili sestavu kloubu. Neodstraňujte krytky číselníků. Posuňte nohu do správné polohy pomocí zvednutých indikátorů jako vodička. Vnitřní indikátor by měl být uprostřed dvou vnějších indikátorů, jak je znázorněno na obrázku níže. Jakmile je nožička ve správné poloze, utáhněte čepičku číselníku otáčením ve směru hodinových ručiček. V opačném případě, když chcete složit naplocho pro snadné skladování nebo přepravu.



Opravit  
Rovný  
Pozice nohou



Pokud jsou viditelné pouze dvě vyvýšené indikační značky, znamená to, že je invalidní vozík obrácený. Otočte nohu o 180 stupňů.



Pro aktivní psy můžete naklonit kolečka dozadu o zářez (viz foto).



Nenaklánějte kola příliš dozadu, protože by to vyvíjelo příliš velký tlak na jejich ramena.

## Úhel nohy

Normálně jsou kola nastavena rovně nahoru a dolů, jak je znázorněno na černém psu. Nastavení koleček mírně dozadu, jako u hnědého a bílého psa, nabídne trochu větší stabilitu pro silnější, aktivnější psy nebo psy, kteří přesouvají svou váhu zpět na zadní končetiny.



## Pomocí Snap Buttons upravte délku, šířku a výšku.



Snap Buttons představují snadný způsob, jak upravit délku, šířku a výšku invalidního vozíku pro psy Walkin' Wheels®. Pomocí pera stiskněte Snap Button, když je uvnitř kloubu, abyste provedli úpravy.



## Úprava délky

**Poznámka: Pokud máte nástavec na přední kolo, odstraňte nástavec a přejděte na str. 18.**



Prodlužovače slouží k úpravě délky. Sada je dodávána s jednou sadou. Chcete-li nastavit nástavce, stiskněte západkové tlačítko a posuňte se na požadovanou délku.

## Je délka správná?

Konec nástavců (černá čepice) by měl být umístěn ve středu lopatek psa. Prodlužovače by se měly dotýkat neoprenových vycpávek na předním postroji a neměly by se vytahovat ven.

Pokud se strany nakloní nahoru, povolte modrý popruh na předním postroji přes záda psa a utáhněte červený spodní popruh.



NESPRÁVNÝ

Pokud se prodlužovače nakloní dolů, uvolněte červený spodní popruh předního postroje 2" a poté utáhněte modrý popruh 2" přes záda psů, aby se prodlužovače zvedly nahoru a rovnoběžně se zemí.



NESPRÁVNÝ

Boční nástavce by měly být rovnoběžné se zemí a uprostřed těla psa.



OPRAVIT

## Nastavení šířky Pomocí

západkových tlačítek na konektoru šířky nastavte invalidní vozík na správnou šířku. Na každé straně boků by měl být alespoň 1/2". Nastavení šířky bude určeno nejširší částí psa, což je obvykle hrudník. Šířkový konektor, který je připevněn k rámu, je dlouhý 9" a bude sahat až 14,5". Pokud potřebujete další šířku, zavolejte nám a objednejte si 13" konektor.



## Přípevnění vzpěr a kol

Invalidní vozík jste obdrželi se správnou velikostí vzpěry a kombinace kol podle měření výšky zadní nohy vašeho psa. Vložte vzpěru do nohy invalidního vozíku a nastavte požadovanou výšku. Pokud potřebujete jiný rozměr kola a vzpěry, kontaktujte nás.




## Nastavení výšky Správné nastavení

výšky závisí jak na výšce, tak na kondici psa. Pokud pes používá zadní nohy, pak pomocí patentních knoflíků nastavte výšku tak, aby byly špičky psa na zemi a pes se mohl účastnit pohybu. Pokud jsou zadní nohy velmi slabé nebo ochrnuté a škrábou nebo kloužou, vložte nohy do třmenů nebo je chraňte botami Walkin'® Pet Boots.

## Zadní opěrné nožní kroužky

Nohy jdou dovnitř každého kroužku

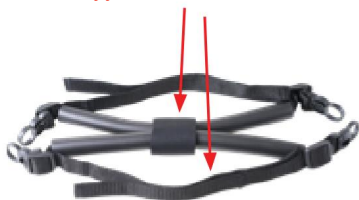

Nožní kroužky podporují zadní končetiny psa. Uvolní váhu z nohou a zároveň umožní psovi používat nohy k udržení svalové hmoty. Nožní kroužky by neměly viset níže než 3" pod rámem. To vytvoří podpůrnou kolébku.

Zde je odkaz, jak upravit páskování: <https://youtu.be/3CoSfPIMWCO>



Nohy jdou dovnitř každého kroužku



Když je pes v kroužcích na nohou, kloub invalidního vozíku by měl být v úrovni poloviny kyčlí. Nožní kroužky by měly vypadat jako dvě C, ne dvě V, přičemž středový konektor je drží pohromadě.

Připněte nožní kroužky k invalidnímu vozíku Zde je odkaz na video, jak nastavit popruhy: <https://www.youtube.com/watch?v=3CoSfPIMWCO>

Kroužky na nohy by měly viset asi 3 palce pod rámem



Rameno  
Nástrčný šroub



Popruhy Leg Ring jdou přes rám a černé plastové spony postroje mají štěrbinu, která se hodí přes šrouby Ramenní zásuvky. Vložte palec do kulatého kruhu a zatlačením nahoru zajistíte (uslyšíte, jak zapadne na místo). Kulatý kruh bude směřovat k zemi. Nohy psa procházejí každým kroužkem. Pro uvolnění dejte palec do kruhu a zatáhněte směrem dolů. Nyní můžete svého psa pomalu spustit na zem.


Připněte kroužky na nohy k invalidnímu vozíku, pokračování

Přebytečný pásek Velcro® se překříží přes záda psa nebo Velcro® dohromady vytvoří rukojeti (viz fotografie níže).

Středový konektor Velcro® lze posunout dopředu nebo dozadu, aby se zabránilo tlaku na genitálie psa (ideální pro intaktní psy).

Konektor na suchý zip lze navíc volně omotat, takže mezi kroužky je prostor. **MUSÍ** být použit středový konektor Velcro® .

Upravte pro nejlepší pohodlí a přizpůsobení. Viz Video nastavení kroužků na nohou níže: <https://youtu.be/3CoSfPIMWCO>

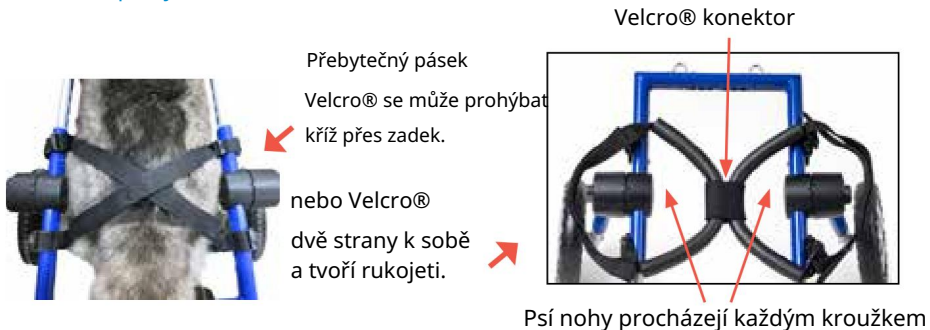

Pryžovou hadičku lze v případě potřeby zkrátit (nepřeřezávat pásku).

Zkuste odříznout asi palec od všech čtyř konců gumy a poté upravit tri-kluzáky na páscích, abyste je utáhli.



### Třmeny Třmeny

jsou volitelné pro tlapy, které se vlečou nebo kloužou.

Třmeny se připevňují k zadní části invalidního vozíku na každou stříbrnou kovovou smyčku (nazývanou také „očnice“).

Gumové hadičky na třmenech musí být nad hlezem psa.

Pomocí aretace s kuličkou se přizpůsobte tak, aby přiléhala.

Noha psa by měla být několik centimetrů nad zemí. Délku šňůrky můžete upravit opětovným zavázáním uzlu. Pokud

používáte třmeny, použijte oba. Použití pouze jednoho třmenu způsobuje, že se pes cítí nevyrovnaný.




hlezno

**DŮLEŽITÉ:** Při vyjímání psa z vozíku se ujistěte, že jste nejprve uvolnili třmeny.



## Upevnění předního postroje

Nastavte prodlužovače tak, aby dosáhly na spony postrojů na předním postroji. Prodlužovací konce **projdou** každým D-kroužkem a poté se zacvaknou do předního postroje. D-kroužky by měly být umístěny těsně za lopatkami. Poznámka: Pokud se hrot D-kroužku zlomí, můžete zavolat o výměnu nebo si střední D-kroužek objednat online: [www.walkinpets.com/wheelchair-dring-clip/](http://www.walkinpets.com/wheelchair-dring-clip/)

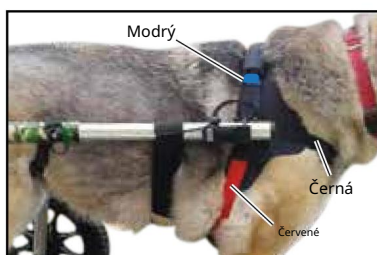

Nastavení předního popruhu:

- Sundejte z postroje 3 černé pohodlné rukávy, abyste mohli upravit velikost. • Hlava psa prochází mezi černým a modrým popruhem. •

Modrý popruh jde psovi přes rameno. • Červený popruh vede za přední nohy a zapíná se na boční stranu postroje.



- Černý pásek vede pod krkem přes přední část hrudníku. • Boční neoprenové panely by měly být umístěny přes lopatky.

- Mužský hrot směřuje na záda a zacvakne. • Všechny tři popruhy by měly přiléhat. • Pohodlné rukávy lze stříhnout pro menší psy a přebytečná ramínka zastrčený. Tento materiál se nebude třepit.

## Změna kapesního umístění D-kroužku (volitelné)

Poznámka: Pokud vám zástupce zákaznického servisu Walkin' Pets nedoporučí vyměnit kapsu, ponechte klip ve střední kapse, protože popruhy jsou nastavitelné. Potřebný: malý křížový šroubovák k odstranění (2) šroubů, pokud měníte polohu spony.

Než začnete, sledujte, kterým směrem směřují hroty na D-kroužku. Vždy by měly směřovat k zadní části psa.

Části:



(B) Nahoře  
Snímek klip

(C) D-kroužek



Krok 1: Odstraňte (2) šrouby z  
(B) horní posuvné spony



Krok 2: Vysuňte (B) horní díl, který  
drží (C) D-kroužek



Krok 3: Vyjměte (A) spodní díl ze  
střední kapsy a vložte jej do  
požadované kapsy




Krok 4: Připojte (C) D-kroužek k  
(B) hornímu dílu a zasuňte jej  
(A) spodní díl



Krok 5: Vyměňte šrouby (2) na  
opačné straně vstupního bodu

Boční pohled

## Je invalidní vozík správně nastaven?

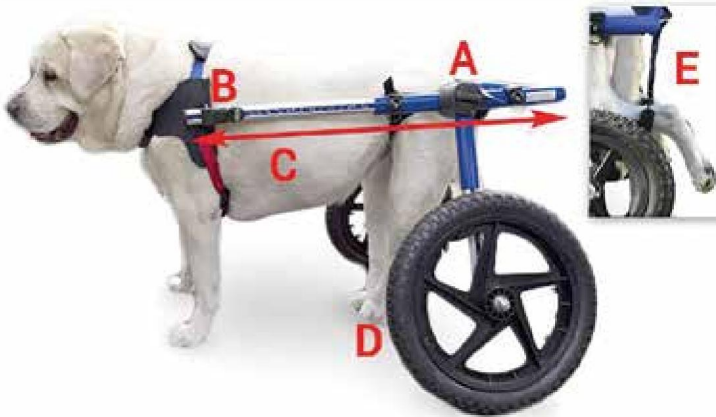

Zkontrolujte výše uvedené položky, abyste se ujistili, že je invalidní vozík správně upevněn. Když je vozík správně nastaven, pes stojí v přirozené poloze. Zde je co zkontrolovat:

Kloub by měl být v linii s boky a kroužky **na** nohou spuštěnými dolů asi 3" od rámu.

**B** Přední popruh D-Ring se zapíná do prodlužovačů za lopatkou.

**C** Prodlužovače jsou rovnoběžné se zemí a nepřesahují přes přední nohy. Tato boční tyč bude umístěna uprostřed těla zvířete zepředu dozadu a záda jsou rovná.

**D** Polštářky prstů dotýkající se země, popř

**E** Prsty nasazené do třmenů nad hlezenním kloubem a sevřené tlakem kuličkový zámek, který drží na místě.

Pokud si stále nejste jisti, zda sedí, můžete poslat několik fotografií svého psa na invalidním vozíku k posouzení na adresu: [HelpMe@WalkinPets.com](mailto:HelpMe@WalkinPets.com) Ujistěte se, že jste uvedli číslo objednávky nebo příjmení, abychom věděli, na koho se obrátit. Rádi bychom viděli Boční pohled, Pohled zezadu a Pohled shora na vašeho psa na invalidním vozíku jako tyto ukázky



Boční pohled



Zpětný pohled



Pohled shora

**Volitelné stavěcí šrouby pro snížení hluku** Pomocí stavěcích šroubů utáhnete váš invalidní vozík a snížíte veškeré rachotivé zvuky. Stavěcí šrouby také udržují invalidní vozík pevný poté, co byl nastaven pro vašeho psa. Když invalidní vozík utáhnete, boční ramena, nazývaná prodlužovače, se budou moci pohybovat nahoru a dolů, jak váš mazlíček zatáčí. To je zcela normální. Flexibilita také umožňuje snadný pohyb na nerovném terénu. Existuje šest míst pro umístění stavěcích šroubů pomocí imbusového klíče. Níže jsou označeny červenými šipkami.

Poznámka: Před prováděním úprav se ujistěte, že jsou níže uvedené stavěcí šrouby uvolněny nebo odstraněny.




## Břišní pás, pokud je potřeba

Některá zvířata budou potřebovat další podporu pod břichem. Můžete určit, zda pes potřebuje další podporu, pokud se jeho páteř skloní dolů. Je také užitečný pro psy s nadváhou nebo s problémy s páteří nebo ploténkami. Jeden konec břišního pásu má připevněný tri-glide (obdélníkový s tyčí uprostřed) a druhá strana má pásek Velcro®. Na obou stranách je lano s tlačítkem (pokyny na str. 17).

Podívejte se sem a podívejte se na video o tom, jak připevnit Belly Belt ke kolům Walkin' Wheels: [hpets.net/bellybelt](http://hpets.net/bellybelt)



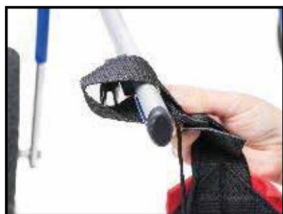

Obrázek A



Obrázek B



Obrázek C

- A. Vezměte stranu s trglidem a protáhněte prodlužovač koncem smyčky.
- B. Vezměte lano a vložte dovnitř sponu postroje na prodlužovači (B). Poté připojte přední postroj ke sponě postroje, abyste zajistili lano. Břišní pás tak nebude klouzat dozadu. Nyní upravte břišní pás tak, aby byl uprostřed břicha psa.
- C. Zajistěte druhou stranu přes nástavec a suchý zip ke spodní části břišního pásu. Účelem břišního pásu je poskytnout podporu střední části vašeho psa.

Pokud váš pes potřebuje více podpory, můžete si zakoupit podporu Walkin' Belly Support:

[www.WalkinPets.com/walkin-belly-support](http://www.WalkinPets.com/walkin-belly-support)



## Možnosti kola

- Pěnová kola: 12" a 16"
- Vzduchové pneumatiky: 12" a 16"

Pokud zjistíte, že vaše míra RLH nebyla správná, můžete si zakoupit vhodnou velikost vspěry. Bylo by to buď 9", 12" nebo 15" [www.walkinpets.com/struts/](http://www.walkinpets.com/struts/)

Plněné vzduchem vs. Plněné pěnou

Plněné vzduchem

Pěna



## Srovnávací tabulka pěnových kol a vzduchových pneumatik:

Pěnová kola: 12" a 16"	Vzduchové pneumatiky: 12" a 16"
<ul style="list-style-type: none"><li>• Lehká pěna s vysokou hustotou materiál, který nabízí hladkou jízdu</li><li>• Velmi dobře se nosí a nikdy se nezničí</li><li>• Vyrobeno pro každý terén</li><li>• 12" a 16" kola mají ½" náboj s ložisky • Skutečná technologie uzavřených buněk bez nasákavosti</li><li>• Snadno se čistí</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pro aktivní psy, kteří se věnují turistice v terénu • Nabízí lepší tlumení nárazů • Podobné jako pneumatika pro horská kola s hlubokým dezénem</li><li>• V případě propíchnutí bude nutné vyměnit duše nebo kola • Vyžaduje 30 PSI vzduchu: použijte vzduchovou pumpu na čerpací stanici • 12" a 16" kola mají ½" náboj s ložisky • Příplatek</li></ul>

Požadovaná údržba: Slaná

voda, bláto a písek mohou způsobit rez nebo erozi hardwaru a ložisek. Doporučujeme kola po vystavení oplachovat hadicí, abyste prodloužili životnost vašeho invalidního vozíku, a pravidelně vyměňovat kola/vzpěry nebo měkké zboží, které se časem opotřebuje.

Zde je náš seznam dílů: [www.walkinpets.com/spare-parts](http://www.walkinpets.com/spare-parts)

Opravte to sami: Někdy se věci porouchají náhodou. Možná je dokážete opravit sami pomocí těchto užitečných videí <https://youtu.be/8jafFoGvjik> Údržba videí: <https://youtu.be/nPAFroYICRE>

Tato část je určena pro montáž plně podpůrného (čtyřnásobného)

invalidního vozíku Walkin' Wheels®

předního nástavce na kolo (za příplatek)

Walkin' Wheels® Front Wheel

Attachment poskytuje pohyblivost psům se slabostí předních nohou nebo slabostí všech čtyř nohou. Je ideální pro pomoc postiženým mazlíčkům při cvičení a pro rehabilitaci, když se hojí.

Stejně jako ostatní produkty Walkin' Wheels® je nástavec na přední kolo nastavitelný, takže se hodí na invalidní vozík Walkin' Wheels® pro psa jakékoli velikosti od 70 do 180 liber a lze jej kdykoli snadno odstranit.

Pokud již máte zadní invalidní vozík a potřebujete více podpory vpředu, zde je instruktažní video ke shlédnutí: [www.walkinpets.com/instructional-videos-large-fully-supportive-dog-wheelchair](http://www.walkinpets.com/instructional-videos-large-fully-supportive-dog-wheelchair)



## V balení Nástavec

na přední kolo lze snadno sestavit a zacvaknout do invalidního vozíku. Budete potřebovat křížový šroubovák. Balíček obsahuje:



- A Levý a pravý nástavec (2)
- B Vzpěry a pojezdová kola (2)
- C nohy (2)
- D Brada a prodlužovací díly (3) Volitelné
- E Imbusový klíč pro šrouby nohou
- F Šrouby na bradu (plastový sáček)
- G Komfortní kryt na bradu (1)
- H Kroužky na přední nohy

**DŮLEŽITÉ:** LEVÁ a PRAVÁ vzpěra a kolečka (B) se musí shodovat s LEVOU a PRAVOU nohou (C). Pokud nejsou správně nainstalovány, bude se invalidní vozík extrémně kývat. Označujeme L a R, jako byste byli na invalidním vozíku.

## Sestavení plně podpůrného invalidního vozíku

Zde je video, pokud jste si zakoupili čtyřkolkový invalidní vozík:

[www.walkinpets.com/instructional-videos-large-fully-supportive-dog-wheelchair](http://www.walkinpets.com/instructional-videos-large-fully-supportive-dog-wheelchair)

Krok 1: Připevnění nohou (C) k nástavcům (A)

Horní část každé nohy je označena písmenem L nebo R. Je důležité, aby byly nohy nainstalovány na správné straně. Nástavce nejsou označeny L nebo R, ale šrouby s vnitřním šestihranem směřují ven.

Připevněte nohu k nástavci pomocí (2) šroubů pomocí většího imbusového klíče. Nohy budou v dopředném úhlu.



## Krok 2: Prodlužovače délky

Odstraňte stávající nástavce délky ze zadních kol Walkin' Wheels® a zacvakněte levý a pravý přední nástavec (A).



## Krok 3: Vložte sestavu vzpěry a kolečka (B) do nohy (C)

Jsou označeny písmeny „L“ a „R“. Je velmi důležité, aby byly instalovány na správných stranách.



**Důležité:** Všimněte si modré lišty na konektoru Caster. Ten musí směřovat ven, aby nástavec předního kola správně fungoval.

## Krok 4: Upravte bradu (D)


Poznámka: Použití bradové tyče je volitelné. Chin Bar dodává nastavci na přední kolo stabilitu a tuhost. Musí přibližně odpovídat šířce zadní části Walkin' Wheels®. Pomocí křížového šroubováku vyšroubujte dva šrouby na bradě a upravte ji tak, aby byla šířka podbradníku přibližně stejná jako šířka zadní části invalidního vozíku. Zajistěte šrouby na místě.




Nástavec na bradu má závity pouze na jedné straně tyče.

Všimnete si, že lišta s velkými otvory nemá závit.

To je strana, kterou musí šroub protáhnout.

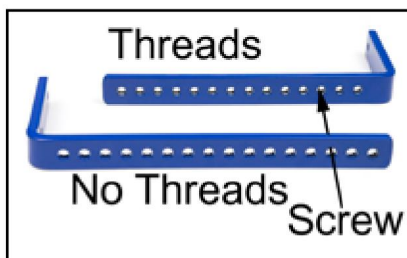

Pomocí přiložených šroubů a podložek připevněte prodlužovací díl k vnější straně bradové lišty.

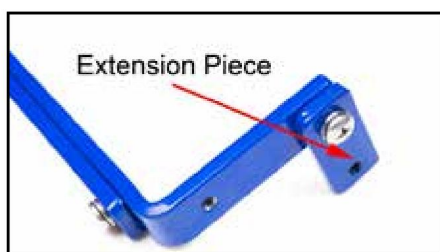

Vložte bradovou tyč do otvorů v přední části levého a pravého nástavce pomocí křídlových šroubů. Bradová tyč je držena dvěma šrouby na bradě (F). Nasaďte pohodlný kryt brady (G) na bradovou tyč. Chin Bar se připevňuje poté, co je pes na invalidním vozíku, pomocí palcových šroubů skrz kovové nástavce.



Krok 5: Nasaďte přední kroužky na nohy (H) stejným způsobem, jakým jste připevnili zadní kroužky na nohy, kromě toho, že přední kroužky nastavte o něco níže než zadní kroužky podle velikosti hrudníku vašeho psa.

Umístění vašeho psa na plně podpůrný (čtyřkolkový) invalidní vozík Existuje mnoho způsobů, jak dostat vašeho psa na plně podpůrný invalidní vozík.

Doporučujeme, abyste se podívali na video na našem webu, kde najdete nějaké nápady, které najdete na tomto odkazu: [www.WalkinPets.com/instructional-videos-large-fully-supportive-dog](http://www.WalkinPets.com/instructional-videos-large-fully-supportive-dog)

#### invalidní vozík

Výška – Nastavte výšku tak, aby se prsty psa dotýkaly země. Nástavce musí být rovnoběžné se zemí.

Délka – Přední nohy psa by měly být vystředěny mezi dvěma šrouby s vnitřním šestihranem nebo plastovými kulatými černými sponami.

Šířka – Šířka je určena nejširší částí psa (obecně hrudníkem psa). Ponechte na obou stranách alespoň centimetr místa.

Kroužky na nohy – Kroužky na nohou vpředu musí být obecně o něco níže než vzadu, aby se přizpůsobily hlubšímu hrudníku psa.

Podle toho upravte nožní kroužky.



Při správném používání a údržbě je invalidní vozík navržen tak, aby vydržel po celý život. Pokud potřebujete náhradní díly pro kola, postroje a další opotřebitelné součásti, můžete je zakoupit na adrese: [WalkinPets.com/spare-parts](http://WalkinPets.com/spare-parts). Rám vozíku nerezaví. Pokud se do invalidního vozíku dostane nečistota nebo písek, můžete jej opláchnout hadicí. Všechny součásti lze vyjmout a vyčistit. Olejování není nutné.

### Walkin' Wheels® s

ručením omezeným jsou poskytovány jako pomůcka při chůzi pro zvířata, která jsou v péči veterináře a pro která byl doporučen psí invalidní vozík. Společnost Wheels for Pets, LLC a její přidružené společnosti, zástupci a distributoři nijak neručí za účinnost nebo vhodnost tohoto produktu.

### Videa údržby

Odkazy na You Tube:

Na You Tube hledejte „handicappedpets.com“

Klikněte na první výsledek "Walkin Pets Logo"

Klikněte tam, kde je uvedeno „Seznam skladeb“

Klikněte na úplný seznam skladeb pro údržbu invalidního vozíku

### Záruka

Na rám invalidního vozíku Walkin' Wheels® poskytuje výrobce, společnost Wheels for Pets, LLC, záruku po dobu pěti let od data nákupu na vady materiálu nebo zpracování. Pokud se rám při běžném používání rozbije, dejte nám prosím vědět a my invalidní vozík opravíme nebo vyměníme dle vlastního uvážení. Jste odpovědní za všechny poplatky za dopravu. Záruka je nepřenosná.

### Zásady vrácení/výměny

Přijímáme vrácení a výměnu všech našich produktů, pokud budou vráceny do 30 dnů od obdržení jako nové se všemi součástmi a kusy. Co znamená "jako nové"? To znamená, že produkt vrátíte přesně tak, jak jste jej obdrželi. Než nám je pošlete zpět, použijte váleček na vlákna a odstraňte vlasy. Vyzkoušejte produkt v interiéru, abyste zabránili znečištění. Výrobek pečlivě zabalte. Chraňte všechny díly před třením o sebe nebo před možným poškozením při přepravě.

Co se stane, když je produkt vrácen špinavý, chybějící díly nebo poškozený?

Naše oddělení vrácení bude muset v případě potřeby vyčistit/vyleštit/opravit/vyměnit. To vyžaduje zdroje, takže vám může být účtován poplatek za opětovné naskladnění. Pokud bude vrácení odmítnuto z důvodu jeho stavu, budeme vás kontaktovat pro projednání a poskytnutí fotografií. Pokud si nejste jisti, jak produkt používat, přebalovat nebo jak se zásady vztahují na produkt, kontaktujte nás a my vám pomůžeme! [www.WalkinPets.com/returns](http://www.WalkinPets.com/returns) Náhradní díly pro invalidní vozíky najdete na: [www.WalkinPets.com/spareparts](http://www.WalkinPets.com/spareparts)

## Volitelné položky a příslušenství

Walkin'® Lift Combo Harness

[www.WalkinPets.com/walkin-lift-combo-harness](http://www.WalkinPets.com/walkin-lift-combo-harness)



Postroj Walkin'® Lift Combo poskytuje kompletní pomoc při zvedání a podporu mobility pro přední a zadní nohy psa. Plně kompatibilní s vozíkem pro psy Walkin' Wheels® . Přední a zadní popruhy lze prodat samostatně.

Walkin'® Lift Harness

[www.WalkinPets.com/walkin-lift-rear-harness](http://www.WalkinPets.com/walkin-lift-rear-harness)



Walkin'® Lift Harness se používá k podpoře zadních partií vašeho psa. Tento postroj je kompatibilní s invalidním vozíkem Walkin' Wheels® a lze jej použít místo kroužků na nohy. Tento zadní postroj je skvělý pro pomoc vašemu psovi. U tohoto postroje se používají klipsové rukojeti.

Walkin'® Pet boty a sada třmenů

[www.WalkinPets.com/boot-as-stirrup-kit](http://www.WalkinPets.com/boot-as-stirrup-kit)



Kombinace Walkin'® Pet Boots s naším třmenovým adaptérem poskytuje vašemu mazlíčkovi ten nejpohodlnější zážitek z invalidního vozíku. Tento produkt je vhodný pro psy, kteří chtějí používat zadní nohy, ale také je potřebují po určité době zvednout z důvodu únavy.

Kryt na amputaci

[www.WalkinPets.com/amputee-leg-ring-cover](http://www.WalkinPets.com/amputee-leg-ring-cover)



Kryt na amputaci je pro domácí mazlíčky s hladkou amputací. Funguje to s nožními kroužky. Potah se nasune přes nožní kroužek a uzavře jednu stranu pro pohodlí.



### Walkin'® Belly Support

[www.WalkinPets.com/walkin-belly-support](http://www.WalkinPets.com/walkin-belly-support)



Walkin'® Belly Support pomáhá poskytnout dodatečnou podporu pro záda vašeho mazlíčka, když je na invalidním vozíku Walkin' Wheels®. Břišní opora, vyrobená z lehké, ale pevné neoprenové tkaniny, pomáhá zvednout střed těla zvířete a zmírnit tak nepřiměřený tlak na záda.

### Walkin'® Drag Bag

[www.WalkinPets.com/walkin-drag-bag](http://www.WalkinPets.com/walkin-drag-bag)



Taška Walkin' Wheels® Drag Bag je navržena pro domácí mazlíčky k použití v domácnosti, když nejsou na židli. Skvělé pro ochranu hrudníku a končetin. Zabraňuje vzniku oděrek a opruzenin škrábáním o koberce, podlahy a drsné povrchy.

### Walkin'® boty do každého počasí

[www.WalkinPets.com/walkin-weather-boots](http://www.WalkinPets.com/walkin-weather-boots)



Walkin'® boty do každého počasí poskytují celoroční ochranu před teplotními extrémy a drsným povrchem a zároveň udržují tlapky čisté a suché. Dobře fungují také pro psy, kteří tahají tlapky na invalidním vozíku. Tyto boty lze otočit tak, aby podrážky směřovaly dopředu, aby byly chráněny tažné tlapky.

### Přední a zadní tréninkové ponožky bez klepání

[www.WalkinPets.com/no-knuckling-training-sock](http://www.WalkinPets.com/no-knuckling-training-sock)



Tréninková ponožka No-Knuckling by měla být používána jako dočasný tréninkový nástroj. Je určen pro krátkodobé, vícenásobné použití, aby pomohl opravit chůzi a zlepšit umístění tlapky.

### Vodítko na invalidní vozík Walkin'®

[www.WalkinPets.com/walkin-wheelchair-leash](http://www.WalkinPets.com/walkin-wheelchair-leash)



Vodítko Walkin' Wheelchair Leash se snadno připojuje k invalidním vozíkům Walkin' Wheels a pomáhá ovládat a vést vašeho psa. Může být také použit k venčení dvou psů současně (bez invalidních vozíků).

### Walkin'® Scooter

[www.WalkinPets.com/walkin-scooter](http://www.WalkinPets.com/walkin-scooter)



Koloběžka Walkin'® pro domácí mazlíčky je navržena tak, aby udržela vašeho mazlíčka v pohodlí a byla vždy na cestách! Umožňuje domácím mazlíčkům volně se pohybovat po domě a zároveň snadno manévrovat kolem vnitřních překážek. Kuličková kolečka umožňují snadný pohyb v libovolném směru!

### Walkin'® nástavec na lyže

[www.WalkinPets.com/walkin-ski-attachment](http://www.WalkinPets.com/walkin-ski-attachment)



Walkin' Ski Attachment pro použití se středním nebo velkým psím invalidním vozíkem Walkin' Wheels lze snadno zaměnit se standardními koly/vzpěrami psího vozíku, aby váš pes mohl klouzat sněhem. Walkin' Ski Attachment pomůže vašemu psovi zabavit se při hraní nebo procházkách sněhem!

### Walkin'® Up-n-Go Leash

[www.WalkinPets.com/walkin-rear-support-leash](http://www.WalkinPets.com/walkin-rear-support-leash)



Vodítko Walkin' Up-n-Go vám pomůže zvednout psa na konci, který to nejvíce potřebuje! Toto zadní podpůrné vodítko se doporučuje pro psy o hmotnosti 20 liber a více.

## Nadace pro handicapovaná zvířata

[www.hpets.org](http://www.hpets.org)

Nadace Handicapped Pets Foundation je nezisková společnost 501(c)3, která se věnuje zdraví a pohodě starších, postižených a zraněných domácích mazlíčků.

Jejím posláním je prodloužit život domácím mazlíčkům tím, že jim pomůžete se pohybovat, aby mohli získat pohyb, který potřebují k dlouhému, šťastnému a zdravému životu; Nadace pro tento účel věnuje invalidní vozíky domácím mazlíčkům v nouzi.

Můžeš pomoci!



Dary s povděkem přijímáme a můžete je poslat na adresu:

Nadace pro handicapovaná zvířata

14 Veterans Road #22

Amherst, NH 03031

(Udělejte šeky splatné: Nadaci Handicapped Pets Foundation)

## SPZ pro invalidní vozík Walkin' Wheels®

[www.WalkinPets.com/dog-wheelchair-licence-plate](http://www.WalkinPets.com/dog-wheelchair-licence-plate)

Můžete si zakoupit poznávací značku pro Walkin' Wheels® vašeho psa.

Vyberte si z psích plemen nebo nahrajte vlastní fotografii pro vlastní SPZ.

Registrační značku lze umístit na zadní stranu invalidního vozíku pro psa, aby se stal dokonalým doplňkem jakéhokoli Walkin' Wheels®.

Veškerý zisk z prodeje SPZ jde do nadace Handicapped Pets Foundation!





Luna

BUĎTE V POHYBU



Buster

BUĎ ŠŤASTNÝ



Joni Mitchell

BUĎTE ŽASNUTÍ



Panthana

BÝT SPOLU

## ZÁZRAKY V POHYBU



**Walkin' Pets**  
by [handicappedpets.com](http://handicappedpets.com)

105 Rt 101A, Suite 18 • Amherst, NH 03031 • (888) 253-0777  
[www.WalkinPets.com](http://www.WalkinPets.com)

Patenty: US 7549398 • Japonsko 5385584 • Kanada 2641092 • EPO 2 050 418  
Ochranné známky: Walkin' Wheels® 4,765,026 • 4,882,354 • 3,725,405 • 4,765,026  
dalších patentů a nevyřízených ochranných známek.